


GARETT

Beauty Lift Skin

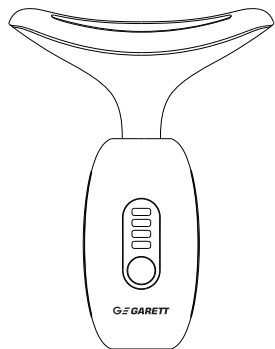

Szonikus arc- és nyakmasszírozó


A termékről

A **Garett Beauty Lift Skin** egy szonikus arc-és nyakmasszírozó készülék egy a kozmetikai ápolást szolgáló kiegészítő lámpával. Akusztikus vibrációk és termikus masszázs felhasználásával javítja a vérkeringést, lassítja a hámsejtek öregedését és csökkenti a nyak ráncait.

A termék tulajdonságai

1. Limfatikus masszázs
2. Nyak lifting
3. Az arc ráncainak csökkentése
4. A homlok ráncainak csökkentése
5. Önműködő kikapcsolási funkció


A termék leírása

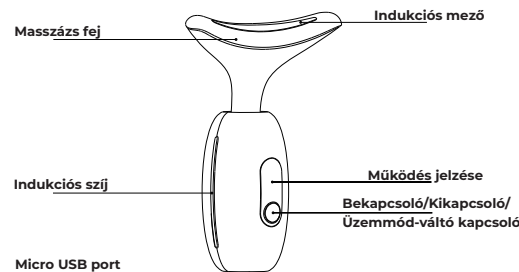

Termék specifikáció

A termék neve: Garett Beauty Lift Skin	
A termék méretei: 92 × 40 × 118 mm	
A töltés módja: USB	A termék tömege (nettó): 66 g
Üzemi feszültség: 3,7 V	Az akkumulátor kapacitása: 800 mAh
Töltési feszültség: 5 V	Töltési idő: 120 perc

Ápoló kozmetikai lámpa

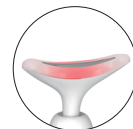

Piros fény

Helyreállítja a bőr rugalmasságát.
Hullámhossza 620 nm



Zöld fény

Világosítja a bőrt, hidratáltabbá téve azt.
Hullámhossza 530 nm



Kék fény

Világosítja a bőrt, hidratáltabbá téve azt.
Hullámhossza 415 nm

Használati utasítás


1. Nyomja meg és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig. A készülék a működésbe lépéséről tájékoztató, hosszú hangjelzést ad ki.
2. Nyomja meg újra a gombot 1,5 másodpercre, és a készülék a felhasználót a kikapcsolódásáról tájékoztató, hosszú hangjelzést ad ki.
3. Mikor a kozmetikai lámpa piros fényt kezd árasztani, a készülék képernyőjén megjelenik a HOT felirat, és a kiválasztott üzemmód függvényében a RED/GREEN/BLUE felirat.
4. Töltés közben a piros, zöld és kék lámpák villogni fognak. Amikor a készülék teljesen felöltődik, a zöld lámpa a kijelzőn folyamatosan világítani fog.
5. A piros fény villogni kezd, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

A használat módja - lépésről lépésre




1. LÉPÉS

A bőr megtisztítását követően vigye fel egyenletesen az ápoló termékeket a nyakra/arcra.

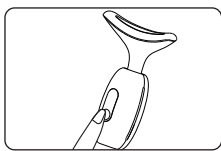


2. LÉPÉS

A készülék bekapcsolása érdekében nyomja meg és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig. A készülék bekapcsolását követően a tenyérnek hozzá kell érnie az indukciós síjhoz, hogy a masszázsfej a bőrrel való érintkezésbe lépés után megkezdje a működést.

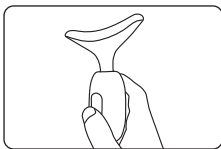

3. LÉPÉS

Válassza ki a kozmetikai lámpa megfelelő fényét, személyes szükségleteinek megfelelően.

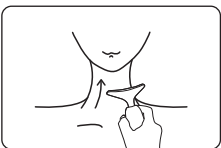

4. LÉPÉS

Mozgassa a masszázsféjet alulról felfelé az arcon/nyakon.

Észrevételek a felhasználók számára

1. A termék használata előtt kérjük figyelmesen elolvasni a használati utasítást és megtartani azt a jövőre nézve.
2. A termék egy USB kábel segítségével tölthető. Amikor az elem töltöttségi szintje alacsony, teljes feltöltése kb. 2 órát vesz igénybe. Feltöltését követően a termék szünet nélkül 4-5 órán át használható.
3. A termék használatának felfüggesztése esetére önműködő kikapcsolási funkcióval rendelkezik. A készülék 3 percet követően önműködően kikapcsol (bármilyen tevékenység hiánya 3 percen át).
4. Tilos a terméket töltés közben használni.
5. A termék melegítő funkcióval rendelkezik. A bőr érintkezési felületének hőmérséklete 42°C + 5°C-t tesz ki.
6. A termék nem vízálló, vízbe meríteni tilos.
7. A termék száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Kerülje a közvetlen napfény érintkezését a készülékkel.
8. A borítás sérülése vagy a készülék üzemzavara esetén kérjük függeszse fel a termék használatát és lépjen kapcsolatba a Garett cég szervizével.
9. A termék használata az alábbi személyek számára nem ajánlott:
 - fizikai rendellenességek miatt orvosi felügyelet alatt álló személyek,
 - terhes nők,
 - fertőző betegségben szenvedő személyek.
 - bőr-rendellenességekkel küzdő személyek,
 - bőrbetegségben szenvedő személyek.



Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékeltektől eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervizbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

www.garett.eu

Gyártó:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.eu



A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A termékben vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.