

Zařízení pro kavitační peeling

Beauty Breeze Scrub



Návod k použití

Vážená zákaznice/Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku.

Následující návod byl připraven na základě nejnovějších poznatků v oboru kosmetologie. Krok za krokem Vás provede kavitačním peelingem, abyste mohli naplno využít moc přístroje a užívat si účinky po dlouhou dobu.

O výrobku

Garrett Beauty Breeze Scrub je multifunkční přístroj pro kavitační peeling, který se používá k neinvazivnímu čištění pleti, zúžení póru, exfoliaci zrohovatělé epidermis, vyhlazení mimických vrásek a vpravení účinných látek do hloubi pokožky. Přístroj spojuje čtyři provozní režimy - kavitační peeling, sonoforézu, mikromasáž a funkci vodní páry.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ:

- čištění pokožky obličeje, dekoltu nebo zad
- exfoliace odumřelé epidermis
- redukce akné
- zesvětlení zbarvení
- snížení viditelnosti černých teček, uzavření póru
- stimulace syntézy kolagenu
- změkčení vrásek
- výživa a hydratace pokožky
- lifting pokožky
- vyhlazení drsné pokožky
- zlepšení mikrocirkulace
- zlepšení tónu pleti

INDIKACE:

- pro všechny typy pokožky
- pokožka se sklonem k akné
- růžovka
- pokožka s černými tečkami
- suchá kůže
- změna barvy
- jemné mimické vrásky
- mastná pleť

KONTRAINDIKACE


- těhotenství a kojení
- akutní zánět kůže
- autoimunitní onemocnění
- epilepsie
- poruchy srážlivosti krve
- fotodermatózy a puchýřová onemocnění kůže
- rakovina
- silné opálení
- otevřené rány
- kožní změny (křečové žíly, mateřská znaménka) ošetřované oblasti
- aktivní hnisavá forma akné, ekzémy
- kardiostimulátor
- implantáty např. zubní, kovové dlahy
- nepoužívejte s exfoliačními přípravky, chemickými nebo mechanickými peelingsy, kyselinami
- nepoužívejte s éterickými oleji
- herpes
- nepoužívejte v případě ošetření estetikou (botox, výplně)
- alergie
- prodělané plastické operace
- nepoužívejte po voscování
- nepoužívejte po ošetření mikrodermabrazí
- nepoužívejte po ošetření kyselinami nebo jiným chemickým peelingem
- srdeční choroby
- virová, bakteriální a plísňová onemocnění pokožky
- onemocnění organismu, dorečka
- bezprostředně po použití sauny, solária nebo pobytu na slunci

Funkce výrobku

1. KAVITACE - ultrazvukové vlny při kontaktu s navlhčenou pokožkou způsobují rozpad a odlupování odumřelé epidermis. Díky tomu je odkryta mladší vrstva pokožky - zbavená nečistot, mazu a nečistot, připravená přijímat aktivní složky obsažené v kosmetických přípravcích. Ošetření poskytuje osvěžení, rozjasnění, vyhlazení a regeneraci pokožky. Zlepšuje mikrocirkulaci pokožky a odstraňuje černé tečky.

2. SONOFORÉZA - jedná se o ošetření pomocí ultrazvukových vln, spočívající ve vpravení aktivních látek do pokožky, vybraných podle jejího typu a potřeb. Ultrazvuk, pronikající hluboko do tkání, vytváří teplo a způsobuje uvolnění kůže a svalů. Ošetření pomocí sonoforézy je jemná, hloubková masáž pokožky, zlepšuje krevní a lymfatický oběh, ale i regeneraci buněk a metabolismus. Ošetření lze provádět 2x týdně v sérii 6-12 ošetření a sérii každé 3 měsíce.

Popis výrobku

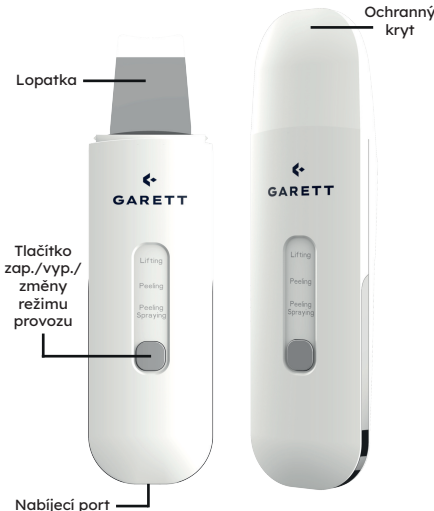

Specifikace výrobku

Název výrobku: Garrett Beauty Breeze Scrub	
Frekvence vibrací: 25kHz	Napětí: 3,7V
Kapacita baterie: 800 mAh	Doba nabíjení: cca. 120 min
Hmotnost výrobku (čistá): 100 g	Rozměry: 180 x 50 x 32 mm

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.eu. Navštivte naše webové stránky a poznejte více výrobků a příslušenství.


Návod k použití

- Odstraňte šperky jak z rukou (hodinky, prsteny), tak z místa ošetření (řetízky, náušnice).
- Nedržte přístroj na jednom místě na kůži, lopatka musí být během procedury v neustálém pohybu. K provedení peelingu musí být pokožka vlhká.
- Můžete postříkat celý obličej nebo navlhčit vatovým tamponem namočeným ve vodě nebo toniku. Během procedury systematicky zvlhčujte pokožku.
- Během procedury otřete lopatku od přebytečné tekutiny a nečistot.
- Netlačte lopatku příliš silně na pokožku. Pracujte pomalu a jemně **pod úhlem 45 stupňů k pokožce**. Během ošetření může pokožka zčervenat, což po pár minutách zmizí.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti očí, štítné žlázy a krčních obratlů.
- **Ošetření by mělo trvat max. 15 minut, každý provozní režim zařízení trvá 5 minut.**
- Zařízení se doporučuje používat každých 7 - 14 dní. Účinky jsou patrné již po prvním ošetření. Pro udržení a posílení účinků se doporučuje provést sérii 5 - 10 ošetření.
- Každý z režimů lze provádět samostatně, v závislosti na potřebách pokožky. Pamatujte však, že účinné látky lépe pronikají do pokožky, která byla peelingována. Ošetření můžete provádět i na zádech nebo výstřihu (po vyloučení srdečních chorob).
- **Vertikální pohyby provádějte vždy zdola nahoru, nebo horizontální pohyby, doporučuje se pohybovat od středu obličeje směrem ven.**
- Pro zavedení účinných látek pomocí přístroje jej otočte a přiložte špachtli pod úhlem 45 stupňů ke kůži a pohybujte s ní kruhovými pohyby. K zavedení účinných látek použijte ampule, séra nebo koncentráty s gelovou konzistencí přizpůsobenou potřebám vaší pleti nebo po aplikaci oblíbeného séra naneste na obličej ultrazvukový gel. To usnadní pronikání přísad do pokožky a zajistí kluzký pohyb hlavy. Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko napájení po dobu cca. 3 sekund. Spustí se režim zvlhčování.
- ⚠️ **Pamatujte, že pouze pravidelné používání přístroje přinese očekávané výsledky a cykličnost ošetření je udrží po dlouhou dobu.**

Plnění nádrže vodou

Chcete-li použít režim 1 a/nebo 2, naplňte nádrž následovně:


1. Sejměte kryt nádržky na vodu.
2. Poté sejměte kryt nádržky na vodu. Chcete-li to provést, posuňte víčko nádržky palcem směrem k aplikátoru, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté jej jednoduše sejměte.
3. Odstraňte uzávěr a naplňte nádrž vodou pomocí speciální pipety. Zavřete uzávěr.
4. Nasadte kryt nádrže zpět na zařízení.

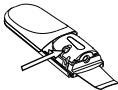

💡 **Nenaplnějte nádrž jinými kapalinami než vodou, aby nedošlo k poškození zařízení.**

Tipy pro uživatele

Směry vedení lopatky po obličeji během procedury

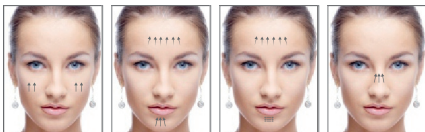

Pro mastnou a smíšenou pleť se doporučuje provádět peeling jednou týdně. Jednou za 2 týdny pro suchou a citlivou pokožku.

Provozní režimy

REŽIM SPRAYING - vodní pára

- **Funkce:** vodní pára
- **Doba ošetření:** 5 min
- **Kosmetika:** voda
- **Popis:**

Režim funguje jako zvlhčovač obličej. Přístroj promění vodu na lehkou mlhu a nezanechává na obličeji žádné kapky. Voda se rozpadá na malé částičky, které jsou menší než póry na pokožce, takže částice rychle pronikají do hlubších vrstev pokožky a zvlhčují ji.

• Průběh:

1. Odstraňte make-up z obličeje. **Doporučujeme k tomu sonický kartáček Garrett Beauty Clean.**
2. Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou pomocí jednoho z aplikátorů.
3. Zapněte zařízení přidržem tlačítka pro změnu režimu po dobu 2 sekund a držte zařízení špachtlí směrem dolů.
4. Nasměrujte proud páry na několik sekund na pokožku, abyste ji zvlhčili.



REŽIM PEELING + SPRAYING - ultrazvukový peeling + vodní sprej

- **Funkce:** čištění + vodní pára
- **Doba ošetření:** 15 min
- **Kosmetika:** voda
- **Popis:**

V tomto režimu funguje ultrazvuk a funkce rozprašování vody současně. Ultrazvukový peeling je účinné stimulační ošetření pro péči o pleť obličeje v každém věku. Pokožka se jemně a pomalu odlupuje a čistí bez napínání nebo mechanického poškození. Při pravidelném používání mizí akné, normalizuje se práce mazových žláz, obnovuje se horní vrstva epidermis a pokožka se stává zřetelně jemnější a pružnější. Funkce rozprašování vody spolu s peelingem udržuje pokožku během ošetření navlženou.

• Průběh:

1. Odstraňte make-up z obličeje. **Doporučujeme k tomu sonický kartáček Garrett Beauty Clean.**
2. Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou pomocí jednoho z aplikátorů.
3. Zapněte přístroj a držte jej špachtlí směrem dolů, aby se pokožka zvlhčila.
4. Opětovným stisknutím tlačítka režimu aktivujte režim PEELING.



5. Jemně pohybujte špachtlí zdola nahoru nebo od středu k vnější straně obličeje podél svalů, pod úhlem 45 stupňů. Vždy pracujte na mokré pokožce. Pokud vodní pára přestane unikat, otočte zařízení špachtlí dolů na 2 sekundy, abyste mohli znovu použít funkci páry.
6. Vypněte zařízení a očistěte lopatku nebo přejděte do dalšího režimu aplikace.

REŽIM PEELING - ultrazvukový peeling

- **Funkce:** čištění
- **Doba ošetření:** 15 min
- **Kosmetika:** voda
- **Popis:**

Ultrazvukový peeling je účinné stimulační ošetření pro péči o pleť obličeje v každém věku. Pokožka se jemně a pomalu odlupuje a čistí bez napínání nebo mechanického poškození.

• Průběh:

1. Odstraňte make-up z obličeje. **Doporučujeme k tomu sonický kartáček Garrett Beauty Clean (přeskočte, pokud pokračujete v ošetření).**
2. Zapněte zařízení a dvakrát stiskněte tlačítko změny režimu pro spuštění režimu peelingu.
3. Jemně pohybujte špachtlí zdola nahoru nebo od středu k vnější straně obličeje podél svalů, pod úhlem 45 stupňů. Vždy pracujte na mokré pokožce. Během procedury otírejte pokožku mokrym tamponem.
4. Vypněte zařízení a očistěte lopatku nebo přejděte do dalšího režimu aplikace.


REŽIM LIFTING - injekce účinných látek

- **Funkce:** sonoforéza/mikromasáž
- **Čas ošetření:** 15 min
- **Kosmetika:** účinná látka (sérum, ampule, koncentrát přizpůsobený potřebám Vaší pokožky)
- **Popis:**

Metoda spočívá ve stimulaci svalů, činí pokožku pružnější, napíná ji, eliminuje její ochabování a zvyšuje vstřebávání živin.

• Průběh:

1. Odstraňte make-up z obličeje (přeskočte, pokud pokračujete v ošetření).
2. Sérum/ampuli/koncentrát s gelovou konzistencí naneste na obličej. USG gel pomáhá při zavádění složek z ampulí a séra, lze jej aplikovat dodatečně již na ampuli.

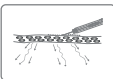

3. Zapněte zařízení a spusťte režim LIFTING. Umístěte lopatku pod úhlem 45 stupňů (odvrácená k režimu peelingu).
4. Pohybujte hlavici podél svalů, zdola nahoru, od středu obličeje směrem ven.
5. Můžete pocíťovat mírné brnění/štipání na kůži.
6. Po ošetření odstraňte zbytky kosmetiky z obličeje a přístroje.
7. Můžete aplikovat svou oblíbenou masku přizpůsobenou potřebám pleti.

Poznámky pro uživatele

1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Výrobek se nabíjí pomocí dodávané nabíjecí sady.
3. Zařízení nepoužívejte ani se jej nepokoušejte odpojit ze zásuvky mokřými rukama.
4. Nepoškozujte ani neupravujte napájecí kabel a výrobek, protože to může vést k jeho poškození.
5. Zabraňte znečištění nabíjecího portu a napájecího kabelu.
6. Zastavte nabíjení, pokud je poškozená zástrčka nebo napájecí kabel, nebo dokonce pokud se jedna ze součástí zahřeje.
7. Použití příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem, může být nebezpečné.
8. Neskladujte výrobek na vlhkých místech, při vysokých teplotách, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
9. V případě poškození přestaňte používat a kontaktujte prodejce nebo přímo servis společnosti Garrett.
10. Nepoužívejte přístroj na podrážděnou, alergickou nebo zánětlivou pokožku. Viz - kontraindikace.
11. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.
12. Po každém ošetření očistěte lopatku a dezinfikujte ji vlhkým tamponem nebo papírovým kapesníkem.
13. Nepolévejte/nestříkejte přímo na hlavici (lopatku) zařízení.

Oprava a údržba

1. V případě poškození nebo poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokud o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
2. Po každém použití výrobek důkladně očistěte. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.
3. Zařízení není zcela voděodolné a nemělo by se umývat vodou.
4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučuje se je pravidelně nabíjet a skladovat na suchém a chladném místě, aby se prodloužila jeho životnost.

Kontaktné údaje společnosti R.M.A sro:
garrett@rmasluzby.cz

Linka pomoci:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojení na klientský formulár:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarrett/>


Záruka a reklamáce

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Záruční podmínky/kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: **www.garett.eu**

Výrobca/osoba zodpovědná v rámci EÚ:

GARETT sp. z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu
garrett@rmasluzby.cz

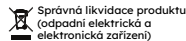

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.



Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě je také umístěno - s možností stažení - na webových stránkách výrobku www.garett.eu

