

Zařízení pro bezjehlovou mezoterapii

Beauty Bright Skin



Návod k použití

Vážená zákaznice/Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku.

Následující návod byl připraven na základě nejnovějších poznatků v oboru kosmetologie. Krok za krokem Vás provede bezjehlovou mezoterapií, abyste mohli naplno využít moc přístroje a užívat si účinky po dlouhou dobu.

O výrobku

Garett Beauty Bright Skin je moderní přístroj pro domácí péči o pleť obličeje. Má 5 provozních režimů, díky kterým jej lze použít pro všechny typy pokožky a kožní problémy. Přístroj využívá funkci bezjehlové mezoterapie RF, EMS proudů, LED světelné terapie a zvukových vibrací. Pravidelné používání **Garett Beauty Bright Skin** optimalizuje každodenní péči, umožňuje udržet pleť mladou a pevnou a podporuje vstřebávání účinných látek.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ:

- redukuje viditelnost vrásek a jemných linek
- podporuje přirozenou odolnost pokožky
- uvolňuje obličejové svaly
- obnovuje pevnost a pružnost pokožky
- zlepšuje krevní oběh
- zlepšuje ovál obličeje
- zanechává pokožku svěží a zářivou
- zintenzivňuje vstřebávání kosmetických přípravků
- vyrovnává tón pleti a rozjasňuje zabarvení
- vyhlazení a zlepšení textury pokožky
- léčba akné

INDIKACE:

- suchá, dehydratovaná pokožka
- vrásky, ztráta pevnosti
- dvojité brada
- šedá, zemitá barva
- změna barvy
- mastná/smíšená, znečištěná pokožka

KONTRAINDIKACE:

- těhotenství a kojení,
- akutní zánět kůže,
- autoimunitní onemocnění,
- oční onemocnění (glaukom, problémy se sítnicí),
- epilepsie,
- užívání fotosenzibilizujících léků a bylin,
- obecná léčba deriváty vitamínu A,
- alergie na světlo,
- poruchy srážlivosti krve,
- fotodermatózy a puchýřová onemocnění kůže,
- sklon k rozvoji keloidů,
- rakovina
- silné opálení
- otevřené rány
- podráždění očí a infekce,
- kožní změny (křečové žíly, mateřská znaménka, prasklé kapiláry) v ošetřované oblasti
- aktivní hnisavá forma akné, ekzémy
- kardiostimulátor
- implantáty např. zubní, kovové dlahy
- nepoužívejte s exfoliačními přípravky, chemickými nebo mechanickými peelinky, kyselinami
- nepoužívejte s éterickými oleji
- herpes
- nepoužívejte v případě ošetření estetickou medicinou (botox, výplně)
- alergie
- prodělané plastické operace
- nepoužívejte po voskování
- nepoužívejte po ošetření mikrodermabrazí
- nepoužívejte po ošetření kyselinami nebo jiným chemickým peelinkem
- srdeční choroby
- virová, bakteriální a plísňová onemocnění pokožky
- onemocnění organismu, horečka
- bezprostředně po použití sauny, solária nebo pobytu na slunci

Funkce výrobku

Fototerapie: Metoda léčby světlem byla známá již ve starověku a nazývala se FOTOOMLAZOVÁNÍ. Aplikací pulzů silného světla hluboko do pokožky stimuluje rekonstrukci kolagenových a elastinových vláken. Pomáhá zlepšit strukturu a regeneraci pokožky zevnitř.

- **Červené LED světlo:** Pomáhá zlepšit krevní oběh, stimuluje metabolismus kožních buněk, má hojivé a jizvivé vlastnosti a regeneruje pokožku. Zvyšuje okysličení buněk, což zlepšuje elasticitu a pevnost pokožky. Použitelná pro všechny typy pleti.
- **Modré LED světlo:** Snižuje nadměrnou tvorbu kožního mazu, má protizánětlivé vlastnosti, zabraňuje vzniku skvrn a zklidňuje podráždění pokožky. Použitelná pro všechny typy pleti.
- **Fialové LED světlo:** Spojuje efekty červeného a modrého světla. Používá se při léčbě jizev po akné a akné, jelikož má antibakteriální vlastnosti. Kromě toho zlepšuje tón pleti, jelikož zvyšuje uvolňování melaninu a aktivuje melanocyty.

Funkce sonických vibrací: Vyvinutá speciálně pro podporu práce pokožky a zlepšení účinnosti ošetření. Vysokofrekvenční vibrace pronikají do hlubší vrstvy pokožky, což má za následek lepší vstřebávání živin z používaných přípravků. Relaxační masáž umožňuje odpočinout unavené pokožce a zlepšit její regeneraci. V kombinaci s technologií fototerapie pomáhá zbavit se tmavých kruhů pod očima a vyhladit pleť.

EMS proudy: Díky použití elektrostimulace dochází ke zlepšení krevního oběhu a odstranění nepotřebných metabolických produktů. Zlepší se zásobení svalů kyslíkem, svaly se uvolní, což má výrazný vliv na snížení viditelnosti vrásek.

RF: RF vysílá elektromagnetickou vlnu o rádiové frekvenci, působí v oblasti dermis, stimuluje kožní buňky k produkci a regeneraci kolagenových vláken.

Popis výrobku



Technická specifikace

Název výrobku: Garrett Beauty Bright Skin	
Frekv. vibrací: 20 - 100 Hz	Výkon: 1,5W
Kapacita baterie: 650 mAh	Doba nabíjení: cca. 120 min
Hmotnost výrobku (čistá): 118 g	Rozměry: 180 x 46,5 x 52 mm

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.eu. Navštivte naše webové stránky a poznejte více výrobků a příslušenství.

Návod k použití

Před a po každém použití zařízení by měla být hlavice důkladně vyčištěna a dezinfikována. Za tímto účelem ji otřete utěrkou namočenou v dezinfekčním prostředku a vytřete dosucha. Nestříkejte kapalinou přímo na hlavici ani ji neponořujte do vody.

- Výrobek je určen pro dospělé.
- Výrobek by neměl být používán kolem očí.
- Před zákrokem sejměte brýle, kontaktní čočky a šperky.
- **Před zákrokem je třeba pleť obličeje důkladně vyčistit, doporučujeme použít sonický kartáček Garrett Beauty Clean nebo Garrett Beauty Clean Soft.**
- Před zahájením masáže přístrojem se doporučuje aplikovat účinnou látku ve formě séra/gelu/masky v plachetce, napuštěné výživnými substancemi přizpůsobenými potřebám pokožky uživatele. V případě rychlého vstřebání séra se pro zvýšení komfortu práce hlavice na pokožce doporučuje použít vodivý USG gel.
- Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte vypínač **O/M** po dobu asi 2 sekund – uslyšíte pípnutí. **Zařízení se automaticky spustí v režimu LIFTING.**
- Jedním stisknutím tlačítka napájení můžete provozní režim tak, aby vyhovoval Vaším individuálním potřebám.
- Výkon zařízení můžete zvýšit/snížit. Chcete-li to provést, stiskněte několikrát opakovaně tlačítko pro zvýšení výkonu **LEVEL**.
- Zařízení automaticky pracuje na nejnižší úrovni.
- Pohyby provádějte vždy ve směru zdola nahoru nebo od středu obličeje směrem ven.
- Nedržte zařízení na jednom místě, mohlo by dojít k popálení pokožky.
- Kontakt zařízení s pokožkou během ošetření by neměl přesáhnout 10 minut.
- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund.
- Po ošetření očistěte hlavici přístroje.
- Přebytečné aktivní přípravky je třeba vmasírovat.
- Pokud používáte USG gel, setřete přebytek papírovou utěrkou.
- Na závěr ošetření se doporučuje aplikovat krém odpovídající potřebám pokožky.

Provozní režimy zařízení

1. LIFTING

Funkce:

- modré LED světlo + EMS elektrostimulace
- 3 úrovně intenzity ošetření, měnitelné pomocí tlačítka LEVEL

2. PHOTOTHERAPY


Funkce:

- teplý obklad + červené/modré/fialové LED světlo
- funkce teplého komprese dosáhne cca. 42 °C
- barva světla LED se změní po stisknutí tlačítka LEVEL

3. PENETRATION

Funkce:

- zvukové vibrace + EMS + fialové LED světlo
- vibrace začnou při kontaktu hlavice s pokožkou
- EMS má 3 úrovně intenzity nastavené tlačítkem LEVEL

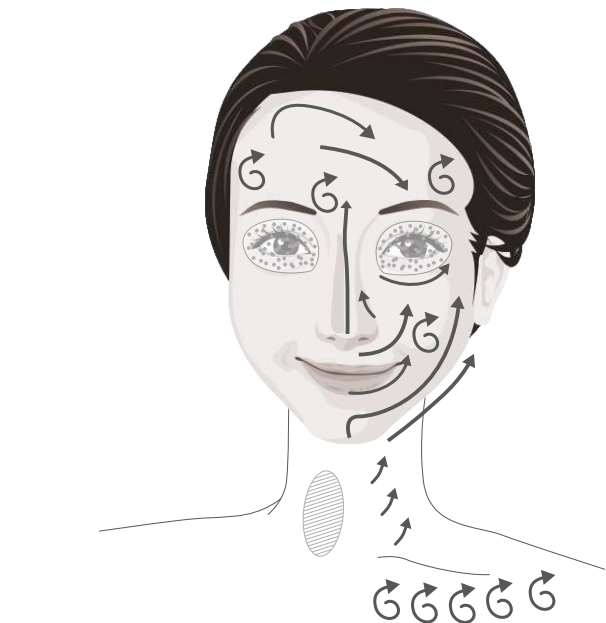

Provádějte ošetření pohybem přístroje v souladu se šipkami na obrázku.

Nepoužívejte zařízení na těchto částech těla ani v okolí očí.

Poznámky pro uživatele

1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Výrobek se nabíjí pomocí dodávané nabíjecí sady.
3. Zařízení nepoužívejte ani se jej nepokoušejte odpojit ze zásuvky mokřými rukama.
4. Nepoškoďte ani neupravujte napájecí kabel a výrobek, protože to může vést k jeho poškození.
5. Zabraňte znečištění nabíjecího portu a napájecího kabelu.
6. Zastavte nabíjení, pokud je poškozená zástrčka nebo napájecí kabel, nebo dokonce pokud se jedna ze součástí zahřeje.
7. Použití příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem, může být nebezpečné.
8. Neskladujte výrobek na vlhkých místech, při vysokých teplotách, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
9. V případě poškození přestaňte používat a kontaktujte prodejce nebo přímo servis společnosti Garrett.
10. Nepoužívejte přístroj na podrážděnou, alergickou nebo zanícenou pokožku. Viz - kontraindikace.
11. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.

Přístroj Garrett Beauty Bright Skin lze používat v kteroukoli roční dobu. Nejlépe večer, aby měla pleť během spánku čas na regeneraci. Během jedné relace můžete používat různé provozní režimy zařízení. Díky kombinované terapii jsou účinky ještě účinnější. Výběr provozních režimů zařízení závisí na očekávaných efektech.

Doporučuje se série 5 - 8 ošetření, každých 10 - 14 dní.

- 💡 **Pamatujte, že pouze pravidelné používání přístroje přinese očekávané výsledky a cykličnost ošetření je udrží po dlouhou dobu.**
- 💡 **Ošetření neprovádějte bezprostředně po použití solária, sauny nebo opalování a bezprostředně před odchodem do mrazivého prostředí.**
- 💡 **Po ošetření a během série je třeba obličej chránit krémem s SPF filtrem.**

Oprava a údržba

1. V případě poškození nebo poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
2. Po každém použití výrobek důkladně očistěte. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.
3. Zařízení není zcela voděodolné a nemělo by se umývat vodou.
4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučuje se je pravidelně nabíjet a skladovat na suchém a chladném místě, aby se prodloužila jeho životnost.

Kontakt na servisní středisko Garrett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Navštívte nás:




Záruka a reklamace

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Záruční podmínky/kontaktní údaje jsou k dispozici na straně:
www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu
contact@garett.eu

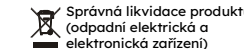

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.



CE Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě je také umístěno - s možností stažení - na webových stránkách výrobku www.garett.eu