

Bezjehlový mezoterapeutický přístroj Beauty Fresh Skin Pro



Uživatelská příručka

Vážený zákazníkú/Vážená zákaznice, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Následující příručka byla připravena na základě nejnovějších poznatků v oblasti kosmetologie. Krok za krokem vás provede bezjehlovou mezoterapií, abyste mohli plně využít sílu přístroje a dlouho se těšit z výsledků.

O produktu

Garrett Beauty Fresh Skin Pro je nejmodernější přístroj pro ošetření pleti obličeje v pohodlí domova. Má **4 provozní režimy**, takže jej lze použít pro každý typ pleti a kožní problém. Přístroj nabízí bezjehlovou RF mezoterapii, **proudý EMS, světelnou terapii LED, sonické vibrace a kryoterapii**. Pravidelné používání přístroje **Garrett Beauty Fresh Skin Pro** optimalizuje každodenní péči, pomáhá udržet pleť mladou a pevnou a podporuje vstřebávání aktivních látek.

SMĚRY PŮSOBENÍ:

- hloubkové čištění pleti;
- redukce vrásek;
- odstranění zabarvení;
- remodelace obličeje;
- rozjasňuje skvrny a vyrovnává tón pleti;
- vyhlazení a zlepšení textury pleti;
- tvarování obličeje;
- odstranění tzv. "váčků" pod očima a tmavých kruhů;
- léčba akné;
- vitaminizace.

INDIKACE:

- suchá a dehydratovaná pokožka;
- vrásky, ztráta pevnosti;
- dvojí brada;
- šedá, zemitá barva;
- zabarvení;
- mastná/kombinovaná, znečištěná pleť.

KONTRAINDIKACE:

- těhotenství a kojení;
- akutní zánět kůže;
- autoimunitní onemocnění;

- oční onemocnění (glaukom, problémy se sítnicí);
- epilepsie;
- užívání fotosenzibilizujících léků a bylin;
- obecná léčba deriváty vitamínu A;
- senzibilizace na světlo;
- poruchy srážlivosti krve;
- fotodermatózy a puchýřnatá kožní onemocnění;
- sklon k jizvení;
- rakoviny;
- silné opálení;
- otevřené rány;
- podráždění a infekce očí;
- kožní léze (křečové žíly, mateřská znaménka, znaménka, porušené kapiláry) v ošetřované oblasti;
- aktivní hnisavé akné, ekzém;
- kardiostimulátor;
- implantáty, např. zubní, kovové destičky;
- nepoužívejte s exfoliačními přípravky, chemickými peelinky, mechanickými peelinky, kyselinami;
- nepoužívejte s esenciálními oleji;
- herpes;
- nepoužívejte, pokud podstupujete estetické lékařské zákroky (botox, výplně);
- alergie;
- plastické operace v minulosti;
- nepoužívejte po depilaci voskem;
- nepoužívejte po ošetření mikrodermabrazí;
- nepoužívejte po ošetření kyselinami nebo jinými chemickými peelinky;
- srdeční choroby;
- virová, bakteriální a plísňová kožní onemocnění;
- chorobné stavy těla, horečka;
- bezprostředně po návštěvě sauny, solária nebo pobytu na slunci.

Funkce výrobku

1.RF RADIOFREKVENCE - druh terapie využívající elektromagnetické záření na radiofrekvenci. Zahříváním pokožky stimuluje regeneraci kolagenu, což vede k pevnější a jasnější pleti. Redukuje vrásky a jizvy a obnovuje pružnost a zářivost.

2.ELEKTROSTIMULACE EMS - metoda využívající nízkofrekvenční pulzní proud. Zahrnuje stimulaci svalů, čímž se pokožka stává pružnější, vypíná se, odstraňuje se její ochablost a urychluje se spalování tuků.

3.SONICKÉ VIBRACE - přispívají k účinnému čištění pleti. Zlepšují také prokrvení a okysličení pokožky, díky čemuž se účinné látky obsažené v kosmetice rychleji vstřebávají.

4.LED TERAPIE

- **červené světlo:** (vlna s délkou 620 nm)

Proniká do hlubokých vrstev pokožky, aktivuje kolagenová vlákna, zlepšuje krevní oběh, redukuje vrásky a vyhlazuje pleť. Vhodné pro všechny typy pleti, zejména pro pleť se známkami stárnutí.

- **modré světlo:** (vlna s délkou 465 nm)

Ničí bakterie, má zklidňující účinky, redukuje akné a jizvy po akné a zmenšuje póry. Má protizánětlivý účinek. Určeno pro mastnou pleť se sklonem k akné a teleangiektázii.

5.KRYOTERAPIE - studený obklad zklidňuje podráždění a zarudnutí, zklidňuje a urychluje regeneraci pokožky po tepelných procedurách. Aplikace chladu podporuje obnovu buněk, pokožka se vyhlazuje a zpevňuje, čímž se zlepšuje tvar obličeje. Chladové procedury jsou vynikající pro řešení otoků způsobených během spánku, takzvaných „váčků“ a oteklých víček.

- 💡 **Střídavá tepelná/studená terapie účinně zpevňuje pokožku.**

Popis výrobku



Technické specifikace

Název produktu: Garrett Beauty Fresh Skin Pro	
Frekvence vibrací: 10 - 30 Hz	Teplota: 6 - 38°C (+/-5)
Kapacita baterie: 1200 mAh	Doba nabíjení: cca 150 min
Hmotnost produktu (netto): 234 g	Rozměry: 187 x 51 x 63 mm

Další informace o tomto zařízení jsou k dispozici na www.garett.eu. Další produkty a příslušenství najdete na našich webových stránkách.

Návod k použití

Před každým použitím a po něm je třeba hlavici důkladně vyčistit a vydezinfikovat. Otřete jej kapesníkem namočeným v dezinfekčním prostředku a vytřete do sucha. Hlavice nesmí být přímo postříkána kapalinou ani ponořena do vody.

- Odstraňte šperky a kontaktní čočky. Provedte odlišení obličeje - doporučujeme použít sonický kartáček **Garrett Beauty Multi Clean**.
- Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení **M/⏻** po dobu přibližně 3 sekund - ozve se pípnutí. Přístroj se automaticky spustí v **režimu RF**.
- Jediným stisknutím tlačítka napájení změníte provozní režim podle svých individuálních potřeb.
- Výkon zařízení můžete zvýšit/snížit. To provedete tak, že stisknete tlačítko pro zvýšení výkonu tolikrát, než se dostanete na požadovaný výkon.
- Jednotka je ve výchozím nastavení nastavena na nejnižší úroveň.
- Pro čištění pleti naneste na hlavu přístroje kosmetický tampon navlhčený vodou/micelární vodou.
- **Vždy provádějte krouživé/táhlé pohyby směrem zdola nahoru nebo od středu obličeje směrem ven.**
- Nedržte přístroj na jednom místě, protože by mohlo dojít k popálení/zmrznutí pokožky.

U zbývajících režimů naneste na pokožku obličeje sérum/ampuli/koncentrát přizpůsobené potřebám vaší pleti. Může se jednat o přípravky s konzistencí vodního gelu nebo plátové masky napuštěné výživnými látkami. Pokud se sérum rychle vstřebává, doporučuje se použít vodivý ultrazvukový gel, který zvyšuje pohodlí práce hlavice na pokožce.

- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 3 sekund.
- Zařízení se po 5 minutách vypne bez zásahu uživatele.
- Po ošetření vyčistěte hlavici přístroje.
- Očistěte pleť - odstraňte nebo vmasírujte přebytečné aktivní přípravky.
- Můžete použít masku přizpůsobenou potřebám vaší pleti.

Instalace kosmetického tamponu


1.Odstraňte magnetický kryt zařízení

2.Navlhčete vatový tampon vodou/micelárním roztokem nebo jiným čistícím produktem. Tampon vyždímejte, aby se do zařízení nedostalo příliš mnoho tekutiny (není vodotěsné) a nestékala vám po obličeji. Doporučuje se používat tenké kosmetické tampony pro intenzivnější provoz zařízení.

3.Utáhněte dříve dodstaněný magnetický kroužek, abyste stabilizovali kosmetický tampon.

4.Zapněte zařízení v režimu RF. V závislosti na vašich potřebách můžete zvýšit intenzitu práce. Spotřebič se zahřívá postupně. Krouživé a táhlé pohyby provádějte podle doporučení v návodu k použití. Vyhněte se oblasti štítné žlázy.

5.Po ukončení ošetření opět sejměte magnetický uzávěr a použitý tampon vyhodte. Tónujte a osušte pokožku. Je připravena k dalšímu ošetření.

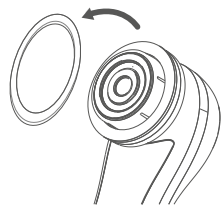

 Proved'te ošetření pohybem přístroje v souladu se šipkami na obrázku.

 Nepoužívejte přístroj na těchto částech těla. Před zahájením zavřete oči.

 Ošetření v režimu LED je povoleno v okolí očí za předpokladu, že jsou zavřené a přístroj není v oblasti očních.



Provozní režimy

1.RF

Funkce: RF

Charakteristika: Zahřívá hluboké vrstvy epidermis a zvyšuje produkci kolagenových vláken.

Kosmetika: ampule/sérum/micelární pleťová voda

Frekvence: každých 10 až 14 dní

2.RF + EMS

Funkce: RF + EMS + ionizace + sonické vibrace

Charakteristika: Hlubkové prohřátí pleti, pronikání účinných látek, rozjasnění, hydratace a výživa pleti.

Kosmetika: ampule/sérum/konzentrát vodně-gelové konzistence

Frekvence: každých 10 až 14 dní

3.EMS

Funkce: EMS + červené LED světlo

Charakteristika: Zahřívání kolagenových vláken, stimulace obličejových svalů.

Kosmetika: micelární voda/ampule/sérum

Frekvence: každých 10 až 14 dní

4.COOL

Funkce: kryoterapie (studený obklad) + modré LED světlo

Charakteristika: Slouží ke snížení otoků a zklidnění podráždění po ošetření.

Kosmetika: zklidňující, proti otokům, vitamínové ampule

Frekvence: denně/podle potřeby

Poznámky pro uživatele

1.Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete návod k použití a uschovejte si jej pro budoucí použití.

2.Výrobek se nabíjí pomocí přiložené nabíjecí sady.

3.Zařízení nepoužívejte ani se jej nepokoušejte odpojit ze zásuvky mokřýma rukama.

4.Neničte ani neupravujte napájecí kabel ani výrobek, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

5.Zabraňte znečištění nabíjecího portu a napájecího kabelu.

6.Zastavte nabíjení, pokud je poškozená zástrčka nebo napájecí kabel nebo se dokonce jedna ze součástí zahřeje.

7.Používání příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem, může být nebezpečné.

8.Výrobek neskladujte ve vlhkých prostorách a při vysokých teplotách, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

9.V případě poškození přestaňte přístroj používat a obraťte se na svého prodejce nebo přímo na servis společnosti Garrett.

10.Přístroj nepoužívejte v blízkosti podrážděné, alergické nebo zanícené pokožky. **Viz - kontraindikace.**

11.Nenechávejte přístroj v dosahu dětí.

Příklad pořadí kompletního ošetření:

1.Zpočátku **RF režim s vatovým tamponem** (pokožka očištěná od nečistot, zahřátá a připravená absorbovat účinné látky).

2.Poté následuje **RF + EMS** (hlubkové zavedení účinných látek).

3. RF (pro dodatečné zpevnění pokožky, působení proti vráskám).

4. COOL (pro zklidnění pokožky na konci a uzavření pórů).

 Pokud je vaše pokožka po ošetření zarudlá, napjatá a oteklá, použijte režim **COOL**.

 Velmi dobrých výsledků zpevnění pleti dosáhnete střídáním režimů **RF a COOL**.

Zařízení **Garrett Beauty Fresh Skin Pro** lze používat kdykoli během roku. Nejlépe večer, aby se pleť během spánku stihla zregenerovat. V jedné relaci můžete používat různé režimy zařízení. Při kombinované léčbě jsou účinky ještě účinnější. Volba provozních režimů závisí na požadovaných výsledcích.

Doporučuje se série 5-8 ošetření každých 10-14 dní.

 **Nezapomeňte, že pouze pravidelné používání přístroje přinese požadované výsledky a že cyklická povaha ošetření umožní jejich dlouhodobé udržení.**

 **Ošetření by se nemělo provádět bezprostředně po návštěvě solária, sauny nebo po opalování a bezprostředně před odchodem do chladného prostředí.**

 **Po ošetření a během série ošetření chraňte obličej krémem s ochranným faktorem SPF.**

Opravy a údržba

1.V případě poškození nebo poruchy přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o opravu jednotky vlastními silami může vést k jejímu poškození a ke ztrátě záruky.

2.Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte. K čištění výrobku nepoužívejte silné čisticí prostředky ani jiné stimulatory.

3.Zařízení není zcela vodotěsné a nemělo by se mýt vodou.

4.Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej pravidelně nabíjet a skladovat na suchém a chladném místě, aby se prodloužila jeho životnost.

Kontakt na servisní středisko Garrett:
garrett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarrett/>

Navštívte nás:



Záruka a reklamace

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Záruční podmínky/kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: **www.garett.eu**

Výrobce/odpovědná osoba v EU:


GARETT

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

www.garett.eu

contact@garett.eu

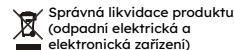

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.



CE GARETT SPÓŁKA Z O.O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se Směrnicemi 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.garett.eu