

Následující návod byl připraven na základě nejnovějších poznatků v oboru kosmetologie. Krok za krokem Vás provede masáží očí, abyste mohli naplno využít moc přístroje a užívat si účinky po dlouhou dobu.

O výrobku

Garett Beauty Glow Eye je inovativní oční masážní přístroj, který funguje stejně dobře pro péči o oční okolí a koutky úst. Má dva typy červeného LED světla s dosahem 620nm a modré s dosahem 420nm. Další výhodou jsou příjemňující ošetření pulzační sonické vibrace. Rychlé a příjemné ošetření spojené s relaxační masáží.

Funkce výrobku

Funkce sonických vibrací: Vyvinutá speciálně pro podporu práce pokožky a zlepšení účinnosti ošetření. Vysokofrekvenční vibrace pronikají do hlubší vrstvy pokožky, což má za následek lepší vstřebávání živin z používaných přípravků. Relaxační masáž umožňuje odpočinout unavené pokožce a zlepšit její regeneraci. V kombinaci s technologií fototerapie pomáhá zbavit se tmavých kruhů pod očima a vyhladit pleť.


Fototerapie: Metoda léčby světlem byla známá již ve starověku a nazývala se FOTOOMLAZOVÁNÍ. Aplikací pulzů silného světla hluboko do pokožky stimuluje rekonstrukci kolagenových a elastinových vláken. Pomáhá zlepšit strukturu a regeneraci pokožky zevnitř.

- **Červené LED světlo:** Pomáhá zlepšit krevní oběh, stimuluje metabolismus kožních buněk, má hojivé a jizvivé vlastnosti a regeneruje pokožku. Zvyšuje okysličením buněk, což zlepšuje elasticitu a pevnost pokožky. Použitelná pro všechny typy pleti. Vlnová délka: 620nm.
- **Modré LED světlo:** Snižuje nadměrnou tvorbu kožního mazu, má protizánětlivé vlastnosti, zabraňuje vzniku skvrn a zklidňuje podráždění pokožky. Použitelná pro všechny typy pleti. Vlnová délka: 477nm.

- MOŽNOSTI VYUŽITÍ:**
- jemně masíruje obličej
 - pomáhá obnovovat kožní buňky
 - zpevňuje kontury obličeje
 - přispívá k lepšímu prokrvení pokožky
 - využívá technologii světelné terapie
 - zintenzivňuje vstřebávání kosmetických přípravků

- INDIKACE:**
- unavená pokožka
 - mimické vrásky
 - nedostatečná pevnost pokožky
 - suchá pokožka
 - kruhy pod očima

- KONTRAINDIKACE:**
- těhotenství a kojení
 - akutní zánět kůže
 - autoimunitní onemocnění
 - oční onemocnění (glaukom, problémy se sítnicí)
 - epilepsie
 - užívání fotosenzibilizujících léků a bylin
 - obecná léčba deriváty vitamínu A
 - fotosenzitivita
 - poruchy srážlivosti krve
 - fotodermatózy a puchýřová onemocnění kůže
 - sklon k rozvoji keloidů
 - rakovina
 - silné opálení
 - otevřené rány
 - podráždění očí a infekce,
 - kožní změny (křečové žíly, mateřská znaménka) v ošetřované oblasti
 - aktivní hnisavá forma akné, ekzémy
 - kardiostimulátor
 - implantáty např. zubní, kovové dlahy
 - tetování, permanentní make-up – v oblasti ošetření
 - nepoužívejte s exfoliačními přípravky, chemickými nebo mechanickými peelingy, kyselinami
 - nepoužívejte s éterickými oleji
 - herpes
 - virová, bakteriální a plísňová onemocnění pokožky
 - onemocnění organismu, horečka
 - bezprostředně po použití sauny, solária nebo pobytu na slunci

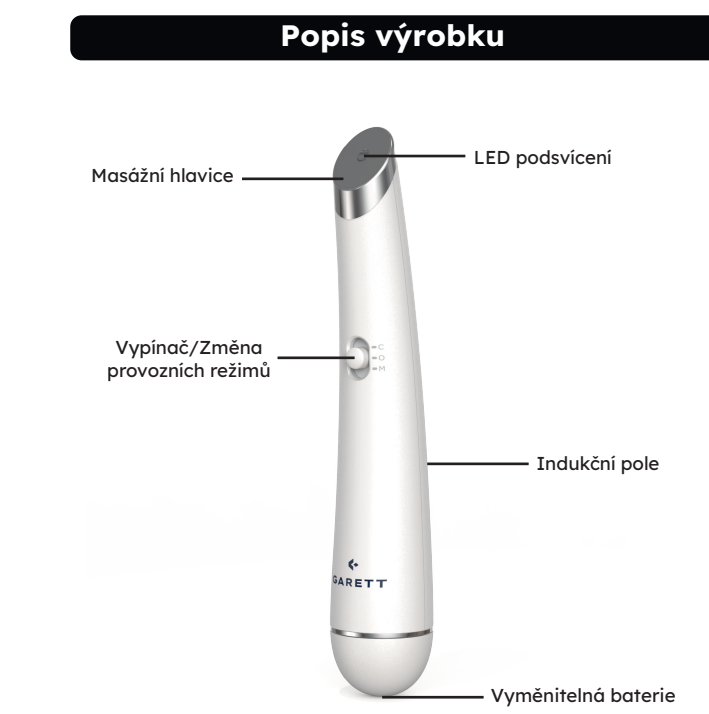

Technická specifikace

Název výrobku: Garrett Beauty Glow Eye	
Napájení: 1 x AA 1,5V LR6	Automatické vypnutí: 3 min
Napětí: 1,5V	Voděodolnost: IPX7
Hmotnost výrobku (čistá): 23 g	Rozměry: 132 x 24 x 24 mm

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.eu. Navštivte naše webové stránky a poznejte více výrobků a příslušenství.

Návod k použití

1. Výrobek je určen pro dospělé.
2. Před prvním použitím nainstalujte **baterii AA 1,5V LR6**.
3. Před zákrokem sejměte brýle, čočky a šperky.
4. **Před zákrokem je třeba pleť obličeje důkladně vyčistit, doporučujeme použít sonický kartáček Garrett Beauty Clean nebo Garrett Beauty Clean Soft.**
5. Před zahájením masáže přístrojem se doporučuje aplikovat účinnou látku ve formě očního krému/séra/gelu přizpůsobeného potřebám uživatele.
6. Pro zahájení masáže přístrojem přesuňte tlačítko (přepínač) do polohy C/M, v závislosti na potřebách pokožky.
7. Vibrace se aktivují přiložením prstu během ošetření na indukční pole.
8. Masírujte oční okolí provádějte zevnitř oka ven. Masáž by měla trvat 1-2 minuty na oko.
9. Masáž kolem úst by měla být prováděna krouživými pohyby a trvat 2 minuty na každé straně úst.
10. Zařízení se automaticky vypne po 3 minutách používání.
11. Nezapomeňte vždy používat zařízení s čistýma a suchýma rukama, abyste zajistili správnou funkci senzoru.

Poznámka: Během procedury nezapomeňte zavřít oči a nehýbat s nimi. Přístroj nelze použít na linii řas a pohyblivé oční víčko.

Provozní režimy

Provozní režim: C - Modré LED světlo + sonické vibrace
Charakteristika: Antibakteriální, čistící, zklidňující režim dermatitidy
Doba ošetření: 1-2 minuty pro každé oko, koutek úst

Provozní režim: M - Červené LED světlo + zvukové vibrace
Charakteristika: Protivráskový, zpevňující režim, napumpování aktivních látek do pokožky
Doba ošetření: 1-2 minuty pro každé oko, koutek úst

Poznámky pro uživatele

1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Výrobek je napájen bateriemi AA 1,5V LR6.
3. Je zakázáno používat tento výrobek během nabíjení.
4. Výrobek není voděodolný, neponořujte jej do vody.
5. Nepokoušejte se odpojit zařízení ze zásuvky nebo jej používat mokřýma rukama.
6. Abyste předešli nehodám, nedotýkejte se kovové části zástrčky.
7. Nepoškozujte, neupravujte, neohýbejte ani nezkrucujte napájecí kabel – mohlo by dojít k jeho poškození.
8. Zabraňte znečištění nabíjecího portu a napájecího kabelu.
9. Zastavte nabíjení, pokud je zástrčka nebo napájecí kabel poškozen nebo se během nabíjení zahřeje.
10. Čistěte zařízení, aby se zabránilo hromadění prachu a nečistot.
11. Neskladujte výrobek v koupelně, na vlhkých místech, při vysokých teplotách, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
12. Výrobek nerozbíjejte, neházejte ním ani jej neupravujte. V případě poškození přestaňte používat.
13. Nepoužívejte přístroj na podrážděnou, alergickou nebo zanícenou pokožku.
14. V takovém případě kontaktujte svého lékaře.
15. Nedovolte dětem používat zařízení.
16. Ženy, které jsou těhotné nebo během menstruačního cyklu, by neměly přípravek používat bez předchozí konzultace se svým lékařem.

Oprava a údržba

1. V případě poškození nebo poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett.
2. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
3. Zařízení není zcela voděodolné. Aby nedošlo k poškození, neomývejte jej vodou.
4. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, doporučuje se jej alespoň 1-2x za měsíc nabít a uložit na suchém a chladném místě, abyste prodloužili jeho životnosti.

Kontakt na servisní středisko Garrett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Navštívte nás:

Záruka a reklamace

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Záruční podmínky/kontaktní údaje jsou k dispozici na straně: www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:
GARETT
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu
contact@garett.eu

Správná likvidace produktu (odpadní elektrická a elektronická zařízení)

Společnost GARETT SPÓŁKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Návod k použití

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -