

Zařízení pro bezjehlovou mezoterapii

Beauty Serum Skin



Návod k použití

Vážená zákaznice/Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku.

Následující návod byl připraven na základě nejnovějších poznatků v oboru kosmetologie. Krok za krokem Vás provede bezjehlovou mezoterapií, abyste mohli naplno využít moc zařízení a užívat si účinky po dlouhou dobu.

O výrobku

Garett Beauty Serum Skin je moderní zařízení určené k snížení viditelnosti stárnutí, zpomalení procesu stárnutí pleti redukci vrásek a změny barvy. Synergický efekt radiových impulsů a fototerapie přináší vynikající hydratační efekt a ošetření proti vráskám. Díky EMS impulsům se pokožka stává pružnější a pevnější, tkáně jsou vyživovány a okysličovány. V důsledku toho získáte zdravou, hluboce hydratovanou a zářivou pleť! Iontoforéza umožňuje správnou hydrataci a výživu i hlubokých vrstev pokožky a vestavěná nádobka na dávkování séra usnadní a urychlí ošetření prováděné doma.

MOŽNOSTI PŮSOBENÍ:

- snižuje viditelnost vrásek a jemných linek
- podporuje přirozenou imunitu pokožky
- uvolňuje obličejové svaly
- obnovuje pevnost a pružnost pokožky
- zlepšuje krevní oběh
- zlepšuje ovál obličeje
- zanechává pokožku svěží a zářivou
- zintenzivňuje vstřebávání kosmetických přípravků
- vyrovnává tón pleti a rozjasňuje zabarvení
- vyhlazuje a zlepšuje texturu pokožky
- léčba akné

INDIKACE:

- suchá a dehydratovaná pokožka
- vrásky, ztráta pevnosti
- dvojitá brada
- šedá, zemitá barva pleti
- změna barvy
- mastná/smíšená, znečištěná pokožka

KONTRAINDIKACE:

- těhotenství a kojení
- akutní záněty kůže
- autoimunitní onemocnění
- onemocnění očí (glaukom, problémy se sítnicí)
- epilepsie
- užívání fotosenzibilizujících léků a bylin
- všeobecná léčba deriváty vitamínu A
- alergie na světlo
- poruchy srážlivosti krve
- fotodermatózy a kožní onemocnění s puchýři
- sklon k rozvoji keloidů
- nádorová onemocnění
- silné opálení
- otevřené rány
- podráždění a infekce očí
- kožní změny (křečové žíly, mateřská znaménka, prasklé kapiláry) v ošetřované oblasti
- aktivní hnisavá forma akné, ekzémy
- kardiostimulátor
- implantáty, např. zubní, kovové dlahy
- herpes
- alergie
- prodělané plastické operace
- srdeční choroby
- virová, bakteriální a plísňová onemocnění pokožky
- onemocnění organismu, horečka
- nepoužívejte v případě ošetření estetickou medicínou (botox, výplně)
- nepoužívejte s exfoliačními přípravky, chemickým nebo mechanickým peelingem nebo kyselinami
- nepoužívejte s éterickými oleji
- nepoužívejte po voskování
- nepoužívejte po ošetření mikrodermabrazí
- nepoužívejte po ošetření kyselinami nebo jiným chemickým peelingem
- bezprostředně po použití sauny, solária nebo pobytu na slunci

Funkce výrobku

Fototerapie: Metoda léčby světlem byla známá již ve starověku a nazývala se FOTOOMLAZOVÁNÍ. Aplikací impulsů silného světla hluboko do pokožky se stimuluje rekonstrukce kolagenových vláken a elastinu. Pomáhá rovněž zlepšit strukturu a regeneraci pokožky zevnitř.

• **Červené LED světlo:** Zlepšuje krevní oběh, stimuluje metabolismus kožních buněk, má hojivé a regenerační účinky na pokožku, vyhlazuje jizvy. Zvyšuje okysličení buněk, což zlepšuje elasticitu a pevnost pokožky. Vhodná pro všechny typy pleti.

• **Modré LED světlo:** Snižuje nadměrnou tvorbu kožního mazu, má protizánětlivé vlastnosti, zabraňuje vzniku skvrn a zklidňuje podráždění pokožky. Vhodná pro všechny typy pleti.

Iontoforéza: Díky této funkci zařízení obnovuje elektrostatickou rovnováhu pokožky, což umožňuje správný průnik účinných látek z kosmetiky do pokožky, kde jsou lépe absorbovány buňkami.


• Výhody:

- Otevírá a čistí kožní póry,
- Zrychluje metabolismus,
- Podporuje buněčnou výživu a regeneraci i v hlubokých vrstvách pokožky,
- Regeneruje poškozená vlákna,
- Rozjasňuje pleť.

EMS proudy: Díky použití elektrostimulace dochází ke zlepšení krevního oběhu a odstranění nepotřebných metabolických produktů. Zlepšuje se zásobení svalů kyslíkem, svaly se uvolní, což má výrazný vliv na snížení viditelnosti vrásek.

Funkce sonických vibrací: Vyvinutá speciálně pro podporu práce pokožky a zlepšení účinnosti ošetření. Vysokofrekvenční vibrace pronikají do hlubší vrstvy pokožky, což má za následek lepší vstřebávání živin z používaných přípravků. Relaxační masáž umožňuje odpočinout unavené pokožce a zlepšit její regeneraci. V kombinaci s technologií fototerapie pomáhá zbavit se tmavých kruhů pod očima a vyhladit pokožku.

Popis výrobku

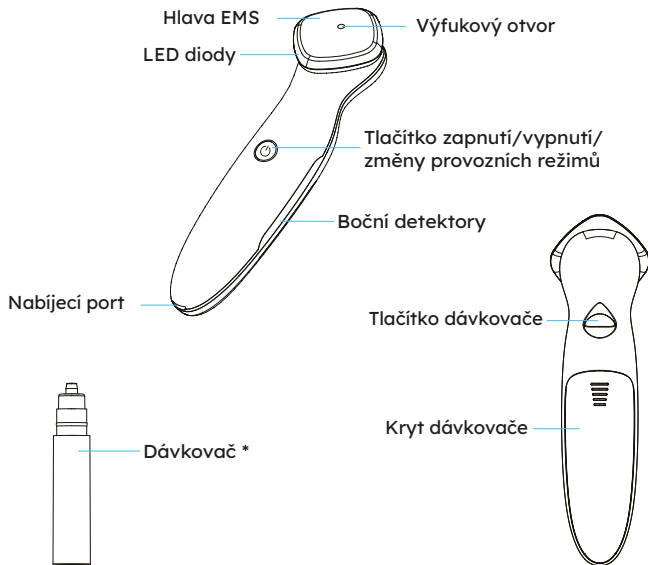

* **Dávkovač** je vakuová nádoba. Pro doplnění jej vyjměte ze zařízení a důkladně jej očistěte od zbytků přípravku. Následně, např. pomocí vatové tyčinky, zatlačte dolů silikonovou vložku umístěnou uvnitř.

Technická specifikace

Název výrobku: Garrett Beauty Serum Skin	
Frekvence vibrací: 10 000 ot./min	Výkon: 3 W
Kapacita baterie: 450 mAh	Hmotnost výrobku (čistá): 85 g
Doba nabíjení: cca. 120 min	Rozměry: 172 x 48 x 52 mm

Více informací o tomto zařízení je k dispozici na straně www.garett.eu. Navštivte naše webové stránky a poznejte více výrobků a příslušenství.

Návod k použití

Před a po každém použití zařízení by měla být hlavička důkladně vyčištěna a dezinfikována. Za tímto účelem ji otřete utěrkou namočenou v dezinfekčním prostředku a vytřete dosucha. Nestříkejte kapalinou přímo na hlavici ani ji neponořujte do vody.

- Výrobek je určen pro dospělé.
- Výrobek by neměl být používán kolem očí.
- Před zákrokem sejměte brýle, čočky a šperky.
- Před zákrokem je třeba pleť obličeje důkladně vyčistit - doporučujeme použít sonický kartáček **Garett Beauty Multi Clean** nebo Garrett **Beauty Clean Soft**.
- Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund. Zařízení se automaticky spustí v režimu I.
- Jedním stisknutím tlačítka napájení můžete změnit provozní režim tak, aby vyhovoval Vaším individuálním potřebám.
- **Pohyby provádějte vždy ve směru zdola nahoru nebo od středu obličeje směrem ven.**
- Nedržte zařízení na jednom místě, mohlo by dojít k popálení pokožky.
- Kontakt zařízení s pokožkou během ošetření by neměl přesáhnout 10 minut.
- Během ošetření může být pociťováno brnění kůže.
- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu asi 2 sekund.
- Po ošetření očistěte hlavičku zařízení.
- Přebytké účinné přípravky je třeba vmasírovat.
- Na závěr ošetření se doporučuje aplikovat krém odpovídající potřebám pokožky.

Chcete-li aktivovat funkci EMS v režimu I a II a vibraci v režimu III, držte zařízení tak, aby se vaše dlaně dotýkala stříbrných prvků po stranách rukojeti „bočních detektorů“.

Během ošetření musí být celá hlava v kontaktu s pokožkou. Zařízení má vestavěný dávkovač séra, což značně usnadňuje ošetření. Chcete-li jej naplnit, sejměte zadní kryt a vyjměte dávkovač. Následně odšroubujte uzávěr a naplňte jej sérem přizpůsobeným potřebám své pleti. Po naplnění vraťte dávkovač na místo a zavřete kryt zařízení. Pro aplikaci séra na pokožku během ošetření stiskněte tlačítko dávkovače umístěné na zadní straně zařízení.

Provozní režimy zařízení

1. Červené LED světlo + EMS (standard)

Funkce:

- červené LED světlo + EMS elektrostimulace
- červené LED světlo má hojivé vlastnosti, vyhazuje jizvy a regeneruje pokožku, elektrostimulace uvolňuje svaly a zvyšuje jejich zásobení kyslíkem

2. Červené LED světlo + EMS (silné) + teplo

Funkce:

- teplý obklad + červené LED světlo + EMS elektrostimulace
- hlava zařízení dosahuje cca. 42 °C
- červené LED světlo zlepšuje prokrvení pokožky a stimuluje buněčný metabolismus, zlepšuje také elasticitu pokožky. Elektrostimulace umožňuje uvolnění svalů a redukci vrásek na obličeji a zlepšuje pružnost a elasticitu pokožky. Teplý obklad rozšiřuje cévy, což umožňuje lepší průnik účinných látek z kosmetiky.

3. Modré LED světlo + iontoforéza s vibracemi

Funkce:

- modré LED světlo + vibrace způsobené iontoforézou
- vibrace začnou při kontaktu hlavice s pokožkou
- modré světlo snižuje otoky a má protizánětlivé a uklidňující vlastnosti. Iontoforéza umožňuje lepší vstřebávání účinných látek z kosmetických přípravků. Vibrační masáž zlepšuje krevní oběh a umožňuje lepší výživu kožních buněk.

Upozornění pro uživatele

1. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Výrobek se nabíjí pomocí dodávané nabíjecí sady.
3. Zařízení nepoužívejte ani se jej nepokoušejte odpojit ze zásuvky mokřima rukama.
4. Nepoškožujte ani neupravujte napájecí kabel a výrobek, protože to může vést k jeho poškození.
5. Zabraňte znečištění nabíjecího portu a napájecího kabelu.
6. Zastavte nabíjení, pokud je poškozená zástrčka nebo napájecí kabel, nebo dokonce pokud se jedna ze součástí zahřeje.
7. Použití příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem, může být nebezpečné.
8. Neskladujte výrobek na vlhkých místech, při vysokých teplotách, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
9. V případě poškození přestaňte používat a kontaktujte prodejce nebo přímo servis společnosti Garrett.
10. Nepoužívejte zařízení na podrážděnou, alergickou nebo zanícenou pokožku. **Viz - kontraindikace.**
11. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.

Zařízení **Garrett Beauty Serum Skin** lze používat v kteroukoli roční dobu. Nejlépe večer, aby měla pleť během spánku čas na regeneraci. Během jedné relace můžete používat různé provozní režimy zařízení. Díky kombinované terapii jsou účinky ještě lepší. Výběr provozních režimů zařízení závisí na očekávaných efektech.
Doporučuje se série 5 - 8 ošetření, každých 10 - 14 dní.

- 💡 **Pamatujte, že pouze pravidelné používání zařízení přinese očekávané výsledky a cykličnost ošetření je udrží po dlouhou dobu.**
- 💡 **Ošetření neprovádějte bezprostředně po použití solária, sauny nebo opalování a bezprostředně před odchodem do mrazivého prostředí.**
- 💡 **Po ošetření a během série je třeba obličej chránit krémem s SPF filtrem.**

Oprava a údržba

1. V případě poškození nebo poruchy prosím přestaňte tento výrobek používat a kontaktujte servis společnosti Garrett. Pokus o vlastnoruční opravu může vést k poškození zařízení a zrušit platnost záruky.
2. Po každém použití výrobek důkladně očistěte. K čištění výrobku nepoužívejte silné detergenty a jiné stimulanty.
3. Zařízení není zcela voděodolné a nemělo by se umývat vodou.
4. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučuje se je pravidelně nabíjet a skladovat na suchém a chladném místě, aby se prodloužila jeho životnost.

Kontakt na servisní středisko Garrett:
garrett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarrett/>

Navštívte nás:




Záruka a reklamace

Na výrobek se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Záruka se nevztahuje na: vady a poškození způsobené uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (v rozporu s určením), mechanická poškození a poškození vyplývající z použití jiného příslušenství, než je obsaženo v sadě, spotřební materiál.

Záruční podmínky/kontaktní údaje jsou k dispozici na straně:
www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT
Sandomierska 209
25 - 330 Kielce, Polsko
www.garett.eu
contact@garett.eu

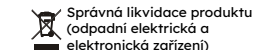

Označení na produktu nebo v souvisejících textech znamená, že by po skončení životnosti neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Abyste předešli poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte zodpovědně, abyste podpořili opětovné využití materiálních zdrojů jako trvalou praxi. Uživatelé v domácnosti mohou získat informace o tom, kde a jak recyklovat tento výrobek způsobem bezpečným pro životní prostředí, od maloobchodního prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo od místních úřadů. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Produkt by neměl být likvidován s jinými komunálními odpady.



CE GARETT SPÓŁKA Z O. O. tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.garett.eu