

GARETT Beauty Flash



IPL szőrtelenítő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

A termékről


A **Garett Beauty Flash** egy IPL fotoepilációs eszköz. Ez a kezelés fényemisszió révén szabadul meg a felesleges szőrszálaktól: világostól és sötétől egyaránt. A fotoepiláló készülék meg tudja különböztetni a bőrtípust, a mélységet és területet, így ezek a változók befolyásolják a kezelés hatékonyságát.



Figyelmeztetések felhasználók számára

- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék használata előtt, és őrizze azt meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék a mellékelt tápegységgel működtethető.
- Ne próbálja kihúzni a készüléket a konnektorból, és ne használja nedves kézzel.
- Ne rongálja és ne módosítsa a tápkábelt, mert az károsodást okozhat.
- Kerülje a tápaljazat és a tápkábel szennyeződését.
- Hagyja abba a készülék használatát, ha a dugó vagy a vezeték sérült vagy használat közben felforrósodik.
- Veszélyes lehet a termékhez nem mellékelt tartozékok használata.
- Ne tárolja a terméket fürdőszobában, nedves helyen, magas hőmérsékleten, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kerülje a vízzel és erős napfényel való érintkezést.
- Sérülés esetén hagyjon fel a termék használatával.
- Azok a kezelés alatt álló személyek, akik rosszul érzik magukat, irritált, allergiás vagy gyulladt bőrük van, ne használják a készüléket előzetes orvosi konzultáció nélkül.
- Gyermekek nem használhatják a készüléket.

A haj növekedési fázisai

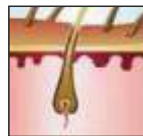

Szőrnövekedési fázis: a hajnövekedés aktív fázisa a szőrtüszőben. A mátrixsejtek intenzíven osztódnak, hogy új szőrt hozzanak létre.



Szőrelhalás fázisa: a haj növekedési szakaszának vége után a szőr az elhalás fázisába lép. Ezalatt az idő alatt a gyökérben átalakulási folyamatok zajlanak. Eltűnik a szőrmátrix, és a szőr kitolásra kerül a bőrfelület felé.



Szőrhullás fázisai: ebben a fázisban a szőr teljesen elkeményedett, és nem zajlik benne semmilyen anyagcsere folyamat. A hagyma egyre vékonyabb lesz, amíg mosakodás vagy fésülés közben végül ki nem esik, vagy az újonnan növekvő szőr ki nem szorítja.

Szőrtelenítési terv

1-2. hét: Használja hetente 2 alkalommal

3-4. hét: Használja hetente 1 alkalommal

5-8. hét: Használja 2 hetente 1 alkalommal

8+ hét: Használja 1-3 havonta 1 alkalommal

Figyelem: A haj növekedésétől függően a használat gyakorisága változhat. A konkrét időtartam egyéni különbségektől függ. A készüléket a haj növekedési ciklusának megfelelően kell használni.



Kezelés átlagos időtartama	
Testrészek	Kezelés időtartama
Kéz/kar	8-10 perc
Láb	15 perc
Bikini terület	2 perc
Hónalj / ágyék	1 perc

A fényerősség kiválasztása


A termék használata előtt ne felejtse el figyelmesen és átgondoltan kiválasztani a fényerősséget.

Ajánlott a készülék tesztelése (pl. a lábon) 48 órával a tervezett fotoepilációs kezelés előtt.

Ha a kezeléskor nem lép fel irritáció vagy kellemetlen érzés, valószínűleg nincs ellenjavallata a teljes kezelés végrehajtásának.


Figyelem: A lámpa intenzitását a bőrtípustól függően kell kiválasztani.

Figyelem: A lámpa élettartama elérheti az 500 ezer impulzust.

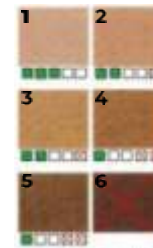

Bőr típusa	1	2	3	4	5	6
Intenzitási szint (teszt)	1	1	1	1	1	X
Intenzitási szint (1. használat)	3	3	2	2	1	X
Intenzitási szint (további használat)	4>5	4>5	3>4	3>4	2>3	X

Termékleírás

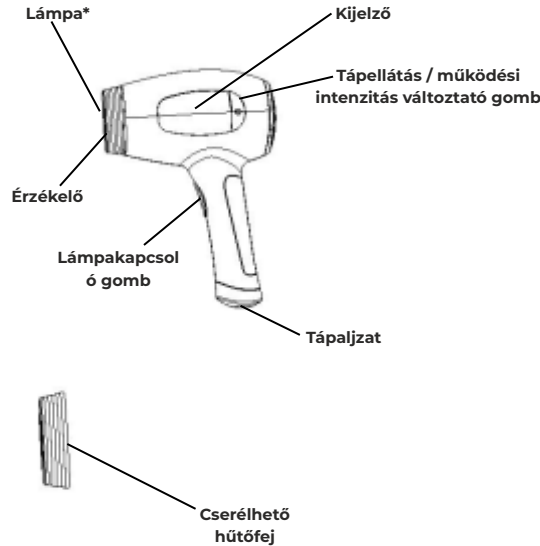

* - A lámpa élettartama elérheti az 500 ezer

Használati útmutató

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a termék használata előtt.
2. Ha nagy mennyiségű szőr van a bőrön, azt az első használat előtt le kell borotválni.
3. Tisztítsa meg a bőrt, és győződjön meg róla, hogy nincs szőrmaradvány a felületén, teljesen száraz és nincs rajta zsíros folt.
4. Győződjön meg arról, hogy a készülék és a lámpa ablaka tiszta és megfelelően van felszerelve.
5. Ha a haj növekedése ideiglenesen leáll (a termék 4-5 alkalommal történő alkalmazása után), nincs szükség borotválkozásra a termék használata előtt.
6. Száraz bőr esetén vagy a téli időszakban borotválja le és hidratálja a bőrt. Másnap ismét hajtsa végre a szőrtelenítést.
7. Az epilálás után a bőr enyhén vörösnek tűnhet, ez normális jelenségnek számít. Javasolt jégpakolás, egyéb enyhítő intézkedés vagy a készülék hűtőfejének használata.
- 8. Használat közben viseljen védőszemüveget. Ne nézzen közvetlenül a villogó fénybe. Ne irányítsa a lámpát a szeme felé.**
9. Ha a bőrszíne nem található meg a színtábla tartományában, ne használja a készüléket.
10. Ajánlott 10-30°C környezeti hőmérsékleten használni. Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot, az emberi test izzadásra hajlamos, ami akadályozhatja a készülék működését és csökkentheti a kezelés végső hatásfokát.
11. Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez, majd az áramhoz.
12. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.
13. Bekapcsolás után hallható a ventilátor működése, és a kijelző világítani kezd.
14. A bekapcsológombbal válassza ki a bőrtípusának megfelelő teljesítményszintet.
15. Ezután helyezze el az epilátort úgy, hogy a fej teljesen érintse a bőrt.

16. Nyomja meg a lámpabekapcsoló gombot, miközben a készüléket a bőrénél tartja. Melegséget és bizsergést érezhet.

17. Mozgassa az epilátort fel/le az epilálást igénylő bőrfelületen.

Figyelem: Kerülje a haj eltávolítását kétszer ugyanazon a területen 10 másodpercen belül.

18. A kezelés befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához, majd válassza le a tápellátást.

A fej levételéhez/cseréjéhez nyomja össze két ujjával, és óvatosan húzza ki. Az ismételt rögzítés abból áll, hogy a fej belső részeit megfelelően a helyükre állítja, és óvatosan benyomja. A fej helytelen felszerelése károsíthatja azt, és a készülék meghibásodásához vezethet.

Használat módja - lépésről lépésre



1. Borotválja le és tisztítsa meg a bőrt.



2. Csatlakoztassa áramforráshoz.



3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.



4. Válassza ki teljesítményszintet.



5. Vegyen fel védőszemüveget.



6. Helyezze a készüléket a bőrre, kapcsolja be a lámpát és kezdje meg a kezelést.

Figyelem: A hűtőfej használata csökkentheti az eljárás után fellépő bőrpírt.

Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékelten eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervízbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

www.garett.eu

Gyártó:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.eu



A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A terméken vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.