

GARETT Beauty Flash



Depilátor IPL

NÁVOD NA POUŽITIE SK

O výrobku

Garett Beauty Flash je zariadenie na fotodepiláciu IPL. Pri tomto ošetrení sa pomocou vyžarovaného svetla zbavíte nežiaducich chĺpkov: svetlých aj tmavých. Fotodepiláčny prístroj dokáže rozlišovať medzi typom kože, hĺbkou a plochou, preto tieto premenné ovplyvňujú účinnosť ošetrenia.




Pokyny pre používateľov


1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.
2. Výrobok sa napája pomocou priloženej súpravy napájacieho zdroja.
3. Zariadenie nepoužívajte ani sa nepokúšajte odpojiť zo zásuvky mokrými rukami.
4. Napájací kábel ani výrobok nepoškodzuje ani neupravuje, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.
5. Zabráňte znečisteniu napájacieho portu a napájacieho kábla.
6. Ak je zástrčka alebo napájací kábel poškodený alebo sa počas používania zahrieva, prestaňte spotrebič používať.
7. Používanie príslušenstva, ktoré sa nedodáva s týmto výrobkom, môže byť nebezpečné.
8. Výrobok neskladujte v kúpeľni, na vlhkých miestach, pri vysokej teplote, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
9. Vyhnite sa kontaktu s vodou a silným slnečným žiarením.
10. Ak je poškodený, prestaňte ho používať.
11. Ľudia, ktorí sa liečia, necítia sa dobre, majú podráždenú, alergickú

alebo zapálenú pokožku, by nemali zariadenie používať bez predchádzajúcej návštevy lekára.
12. Nedovoľte deťom používať zariadenie.


Fázy rastu chĺpkov

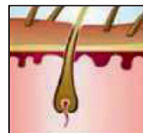

Fáza rastu chĺpkov: aktívna fáza rastu chĺpkov v chĺpkovom folikule. Matričné bunky sa intenzívne delia a vytvárajú nové chĺpky.

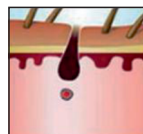

Fáza atrofie: Po fáze rastu sa chĺpky dostávajú do fázy atrofie. Počas tohto obdobia prebiehajú v chĺpkovom koreni remodelačné procesy. Matrica chĺpkov zmizne a chĺpky sa posunú smerom k povrchu pokožky.

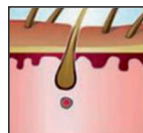


Fáza vypadávania chĺpkov: v tejto fáze sú chĺpky úplne zrohovatené a už v nich neprebiehajú žiadne metabolické procesy. Folikul je čoraz tenší, až nakoniec vypadne pri umývaní, kefovaní alebo ho vytlačia novo rastúce chĺpky.

Plán depilácie

- 1.-2. týždeň:** Používajte 2-krát týždenne
- 3.-4. týždeň:** Používajte 1-krát týždenne
- 5.-8. týždeň:** Používajte raz za 2 týždne
- Týždeň 8+:** Používajte 1-krát za 1-3 mesiace

Poznámka: Frekvencia používania sa môže líšiť v závislosti od rastu chĺpkov. Konkrétny časový rámec závisí od individuálnych rozdielov. Používajte podľa cyklu rastu chĺpkov.

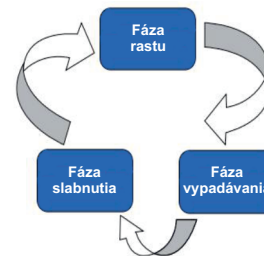

Priemerný čas ošetrenia	
Časť tela	Čas ošetrenia
Ruky/ramená	8 až 10 minút
Nohy	15 minút
Zóna bikín	2 minúty
Podpažia/ramená	1 minúta

Výber úrovne intenzity svetla


Pred použitím výrobku nezabudnite starostlivo a premyslene zvoliť intenzitu svetla. Odporúča sa otestovať zariadenie (napr. na nohe) 48 hodín pred plánovanou fotodepiláciou. Ak sa po teste nevyskytnú žiadne príznaky podráždenia alebo nepohodlia, nemali by existovať žiadne kontraindikácie pre úplné ošetrenie.

Poznámka: Intenzitu žiarenia je potrebné zvoliť podľa typu pleti.
Poznámka: Životnosť lampy až 500 000 impulzov.



Typ pokožky	1	2	3	4	5	6
Úroveň intenzity (test)	1	1	1	1	1	X
Úroveň intenzity (1 použitie)	3	3	2	2	1	X
Úroveň intenzity používania	4>5	4>5	3>4	3>4	2>3	X

Popis produktu

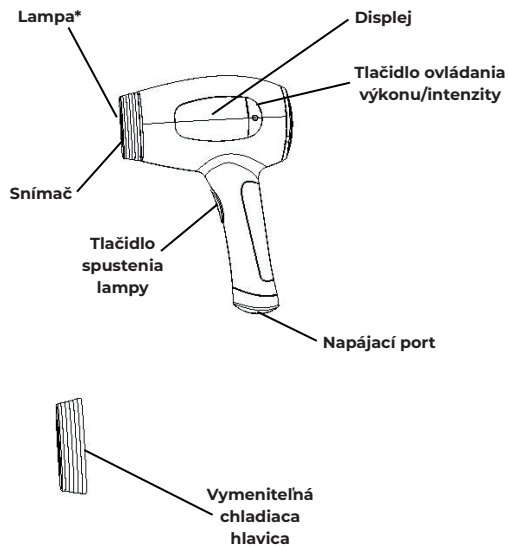

* - Životnosť lampy až 500 000 impulzov.

Návod na použitie

1. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Ak je na pokožke veľké množstvo chĺpkov, pred prvým použitím by ste ich mali oholiť.
3. Očistite pokožku, uistite sa, že na povrchu nie sú žiadne zvyšky vlasov, je úplne suchá a na pokožke nie sú žiadne mastné miesta.
4. Skontrolujte, či sú zariadenie a okienko lampy čisté a správne nainštalované.
5. Ak sa rast chĺpkov dočasne zastaví (po použití tohto výrobku 4-5-krát), pred použitím tohto výrobku nie je potrebné holenie.
6. V prípade studenej alebo suchej pokožky sa predtým oholte a pokožku navlhčite. Po ďalšom dni epilujte znova.
7. Vaša pokožka môže byť po epilácii mierne červená, čo je normálne. Odporúča sa použiť ľadový obklad, iné upokojujúce prostriedky alebo chladiacu hlavicu zariadenia.
- 8. Pri práci noste ochranné okuliare. Nedívať sa priamo do blikajúceho svetla. Nesmerujte lampu do očí.**
9. Ak váš odtieň pleti nie je v rozsahu farebnej tabuľky, zariadenie nepoužívajte.
10. Odporúča sa používať pri teplote okolia 10-30 °C. Keď teplota okolia prekročí 30 °C, ľudské telo je náchylné na potenie, ktoré môže narušiť činnosť zariadenia a znížiť konečné výsledky ošetrovania.
11. Pripojte zariadenie k napájacemu adaptéru a potom k zdroju napájania.
12. Ak chcete zariadenie spustiť, stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy.
13. Po spustení budete počuť chod ventilátora a rozsvieti sa pole displeja.
14. Pomocou tlačidla napájania vyberte vhodný stupeň výkonu, ktorý vyhovuje vášmu typu pokožky.
15. Potom umiestnite epilátor tak, aby sa hlava úplne dotýkala pokožky.
16. Stlačte tlačidlo spustenia lampy, pričom zariadenie držte pri pokožke. Môžete pociťovať teplo a mravčenie.
17. Prechádzajte epilátorom smerom hore/dole po pokožke, ktorú chcete epilovať.

Poznámka: V priebehu 10 sekúnd neodstraňujte chĺpky dvakrát na tom istom mieste.

18. Po dokončení stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy, aby sa zariadenie vyplo, a potom ho odpojte od elektrickej siete.

Ak chcete hlavu vybrať/vymeniť, stlačte ju dvoma prstami a jemne potiahnite. Opätovná inštalácia pozostáva zo správneho zarovnanie vnútorných komponentov hlavy na ich miesta a jemného pritlačenia. Nesprávna inštalácia hlavy môže mať za následok poškodenie hlavy a nesprávnu funkciu jednotky.

Návod na použitie krok za krokom



1. Pokožku oholte a očistite.



2. Pripojte k napájaniu.



3. Stlačte tlačidlo napájania na približne 3 sekundy.



4. Vyberte úroveň výkonu.



5. Používajte ochranné okuliare.



6. Priložte zariadenie na pokožku, aktivujte lampu a spustite ošetrovanie.

Poznámka: Použitie chladiacej hlavice môže znížiť začervenanie, ktoré sa môže objaviť po ošetrovaní.

Záruka/reklamácie

Na produkt sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: chyby a poškodenia spôsobené chybou používateľa alebo nesprávnym používaním (nezlučiteľným s určeným použitím), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného ako dodaného príslušenstva, spotrebného materiálu. Pre reklamáciu produktu vyplňte záručný list, ktorý je priložený k zariadeniu a odošlite zariadenia spolu s dokladom o nákupe na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na stránke:

www.garett.eu

Výrobca:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.eu

Správna likvidácia produktu
(Staré elektrické a elektronické zariadenia)

Toto označenie umiestnené na produkte, alebo v textoch, ktoré sa naň vzťahujú poukazuje na to, že po skončení životnosti by sa tento produkt nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste predišli možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom oddel'te výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili propagáciu opätovného použitia materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologickým spôsobom, môžu používatelia v domácnostiach získať od predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo od miestneho úradu. Priemyselný používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.



Vyrobené v ČR