

# GARETT

Beauty Smile Charge




## SADA NA BIELENIE ZUBOV

## NÁVOD NA POUŽITIE SK

### Sada


Sada na bielenie zubov od spoločnosti GARETT sa skladá z troch základných častí:

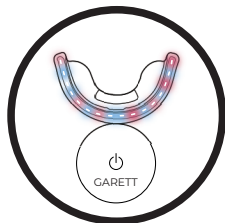

LED lampa  
+  
náustok na zuby


Ide o špeciálnu technológiu vysokofrekvenčného studeného svetla na účinné bielenie zubov. Lampa má nabíjateľnú batériu, ktorá sa nabíja pomocou magnetického kábla, ktorý je súčasťou súpravy.

Mäkký náustok bol navrhnutý tak, aby čo najlepšie zapadol do štandardného zubného oblúka pokrývajúceho celý chrup. Vďaka tomu bude proces bielenia zubov pre používateľa pohodlný.

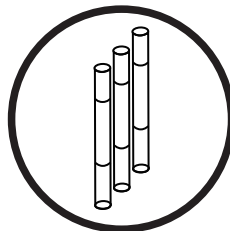

Bieliaci gél

Modré svetlo LED reaguje s bieliacim gélom a účinne odstraňuje škvrny na povrchu zubov. V balení sú tri aplikátory.

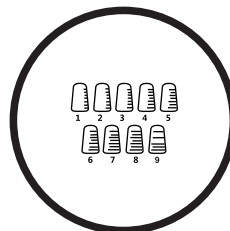

Sprievodca odtieňmi


Sprievodca odtieňmi je šablóna, ktorá vám umožní porovnať aktuálnu farbu vašich zubov s výsledkami bieliaceho ošetrovania.

### Pokyny krok za krokom




#### ČISTENIE ZUBOV A ÚSTNEJ DUTINY

Vyčistite zubnú čiapočku a osušte ju. Potom si zuby jemne vyčistite zubnou pastou a opláchnite vodou.

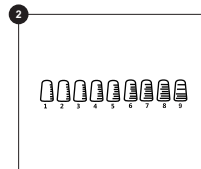


#### SPRIEVODCA ODTIEŇMI

Pri pohľade do zrkadla porovnajte svoje zuby so šablónou, aby ste určili aktuálny odtieň svojich zubov.

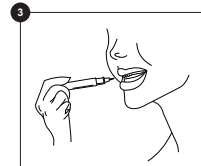


#### APLIKÁCIA GÉLU

Otáčajte aplikátorom na bielenie zubov, kým sa gél nedostane na špičku. Potom naneste gél rovnomerne na horné aj dolné zuby. Nenanášajte príliš veľa gélu. Viac gélu neznamená rýchlejšie a lepšie výsledky. Zakaždým použite približne 0,5 – 0,7 ml. Nenanášajte gél priamo na dásň alebo vnútornú stranu úst! To spôsobuje pocit pálenia, ktorý do 24 hodín ustúpi. V prípade intenzívneho pálenia by sa mal gél opláchnuť vodou.

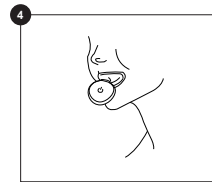

#### NASTAVENIE ZARIADENIA

Vložte náustok do úst a zahryznite, potom dotykovým tlačidlom zapnite svetlo. Pred ošetrovaním sa zhlboka nadýchnite, aby ste znížili tvorbu slín (pri nadbytku slín sa gél zriedi).

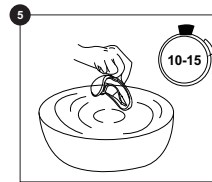

#### UKONČENIE OŠETRENIA

Bieliace zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach v režime modrého svetla (10 minút v režime modrého a červeného svetla). Po skončení vyberte zariadenie z úst a opláchnite náustok vodou. Porovnajte odtieň svojich zubov so šablónou.



#### OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA JEDLA A PITIA

30 minút po ošetrovaní nejedzte a nepite nič okrem vody.

## Zloženie gélu

Deionizovaná voda, glycerol, propylénglykol, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, šťava z listov aloe vera, extrakt zo semien granátového jablka, extrakt z kvetov harmančeka, kyselina citrónová, xantánová guma, karbomér, mentol.

## Rozsah aplikácie

Škvrny na zuboch od kávy, tabaku, farbív v potravinách, starnutia a ďalších faktorov, ktoré môžu spôsobiť zmenu farby.

## Uskladnenie gélu

Vyhňte sa slnečnému žiareniu a skladujte na chladnom a suchom mieste. Gélové perá môžete skladovať v chladničke. Po dokončení ošetrovania nasadte nadstavec na špičku aplikátora. Tým sa zabráni úniku aktívnych zložiek bieliaceho gélu.

## Poznámky

- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodená sklovina alebo dentín alebo ak je prítomné ochorenie ďasien.
- Prístroj nepoužívajte, ak ste alergický na zložky gélu.
- Gél neprehŕtajte.
- Zariadenie nie je vhodné pre osoby mladšie ako 16 rokov a tehotné alebo dojčiacie ženy.
- Zariadenie nie je vhodné pre osoby s citlivosťou zubov.
- Prístroj nie je vhodný na bielenie keramických a umelých zubov (výplne, korunky, fazety, mostíky atď.).

- Prístroj nie je vhodný na odstránenie zafarbenia zubov spôsobeného poškodením zubov alebo spôsobeného lekárske ošetrovaním.
- Prístroj nie je vhodný na odstránenie zafarbenia spôsobeného liekmi.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

### Ako dlho vydrží jeden aplikátor bieliaceho gélu?

- Jedna nádoba by mala vystačiť na približne 4 až 5 aplikácií.

### Ako dlho trvá účinok vybielených zubov?

- Bieliaci účinok by mal trvať približne 2 až 3 mesiace od ukončenia 14-dňového ošetrovania. Udržanie účinku závisí od vyhýbania sa konzumácii potravín, ktoré spôsobujú zmenu farby zubov.

### Vybieli gél aj umelé zuby?

- V prípade imitácií zubov, ako sú výplne, mostíky, korunky a implantáty, môže náš gél iba zosvetliť ich pôvodnú farbu.

### Je bieliaci gél zdraviu škodlivý?

- Zložky nášho gélu sú 100 % bezpečné. Pred použitím odporúčame, aby ste sa oboznámili so zložením gélu v návode na použitie a na obale zariadenia. V prípade alergických problémov sa poraďte so svojím lekárom.

## Naše produkty

- **Garett Beauty Smile Strips** - sú bieliace pásiky, ktoré poskytujú okamžitý efekt rozjasnenia zubov. Stačí ich nalepiť na vyčistené zuby približne na 30 minút a potom ich zo zubov odlepiť. CocoStrips sú dokonalou kombináciou pre používateľov bieliacej čiapky Garrett.

- **Garett Beauty SmileWhitening Powder** - je prášok na čistenie zubov pred bielením pomocou bieliacej vaničky Garrett. Účinne odstraňuje zvyšky kávy, čaju, vína a nikotínu. Bieliaci prášok môžete používať 3 až 5-krát týždenne pred každým použitím bieliaceho nadstavca.

- **Garett Beauty Smile Bamboo Brush** - je zubná kefka vyrobená z bambusu a kokosových škrupín. Štetiny kefy sú napustené práškom z dreveného uhlia, ktorý účinne odstraňuje ľahké škvrny na zuboch a poskytuje rozjasňujúci účinok.



## Záruka/reklamácie


Na produkt sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: chyby a poškodenia spôsobené chybou používateľa alebo nesprávnym používaním (nezlučiteľným s určeným použitím), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného ako dodaného príslušenstva, spotrebného materiálu. Pre reklamáciu produktu vyplňte záručný list, ktorý je priložený k zariadeniu a odošlite zariadenia spolu s dokladom o nákupe na adresu servisu uvedenú na záručnom liste.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na stránke:

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

### Výrobca:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński  
ul. Targowa 18/1413  
25-520 Kielce  
[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

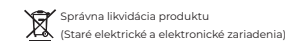

Toto označenie umiestnené na produkte, alebo v textoch, ktoré sa naň vzťahujú poukazuje na to, že po skončení životnosti by sa tento produkt nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste predišli možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom oddelte výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili propagáciu opätovného použitia materiálnych zdrojov ako bežnú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok ekologickým spôsobom, môžu používatelia v domácnostiach získať od predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo od miestneho úradu. Priemyselný používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

