

GARETT

Beauty Smile Lite




FOGFEHÉRÍTŐ KÉSZLET

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU


KÉSZLET

A GARETT fogfehérítő készlet négy alapvető részből áll:

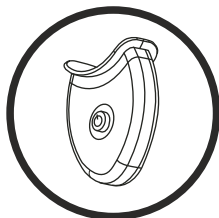


LED lámpa

Ez egy speciális nagyfrekvenciás hidegfény-technológia, amely biztosítja a hatékony fogfehérítést. A lámpa belsejében cserélhető elem található.

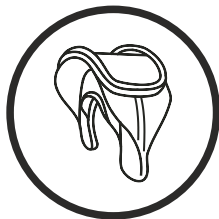


Szájrész a fogakhoz

A puha szájrész úgy lett kialakítva, hogy a legjobban illeszkedjen a szokásos fogívhez, lefedve az egész fogazatot. Ennek köszönhetően a fogfehérítés folyamata kényelmes lesz a felhasználó számára.

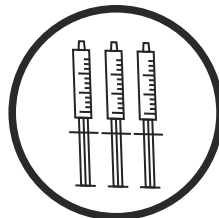

Fogfehérítő gél

A kék LED fény reakcióba lép a fehérítő géllel, amely hatékonyan eltávolítja a fog felületének elszíneződését. A dobozban három applikátor található.

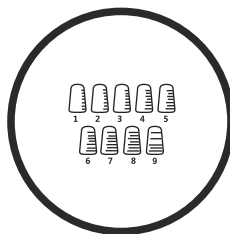

Tesztter az árnyalatokhoz


A teszter az árnyalatokhoz egy sablon, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza a fogak aktuális színét, és összehasonlítsa azt a fehérítő kezelés hatásával.

Használati utasítás lépésről lépésre




1 FOGAK ÉS SZÁJ TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a szájrészt és szárítsa meg. Ezután finoman mossa meg a fogait fogkrémmel, és öblítse ki a száját vízzel.

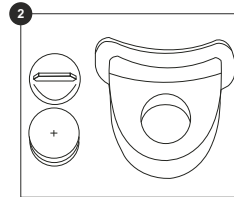


2 A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a műanyag lapkát az elem alól, és az elemet tegye vissza a fogfehérítő készülékbe.

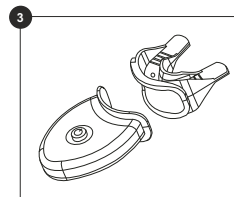


3 A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Csatlakoztassd a szilikon fogfehérítő betétet a LED fehérítő lámpához.

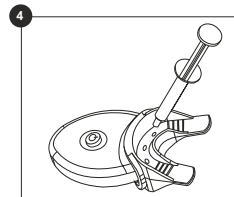

4 A GÉL FELVITELE

Vigyen fel 1/4 applikátornyi fogfehérítő gél a szájrész mindkét oldalára. Csak annyit használjon, hogy elfedje a fogak elülső felületeit, elkerülve az ínyvel való érintkezését.

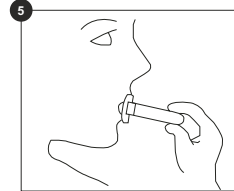


5 FOGFEHÉRÍTÉS

Helyezze a szájrészt a fogakra. Törölje le az ínyével érintkező gél. A kezdéshez nyomja meg a START gombot.



6 TISZTÍTÁS

30 perc elteltével vegye ki a szájrészt a szájából. Öblítse ki a száját meleg vízzel, majd válassza le a szájrészt a fogfehérítő lámpáról, és alaposan tisztítsa meg.

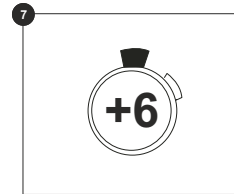

7 A FOGFEHÉRÍTÉS FOLYAMATA

A helyes fogfehérítési eredmények érdekében ismétlje meg az eljárást a következő hat napon belül.

A GÉL ÖSSZETÉTELE

Ionizált víz, glicerín, propilén-glikol, nátrium-hidrogén-karbonát, nátrium-klorid, aloe vera kivonat, gránátalma mag kivonat, kamilla virág kivonat, citromsav, xantángumi, karbomer, mentol.

AZ ALKALMAZÁS IDŐTARTAMA

Fogakon a foltokat a kávé, a dohány, az étel színezékek, az öregedés és egyéb tényezők okozzák, amelyek elszíneződéshez vezethetnek.

TÁROLÁS

Kerülje a közvetlen napfényt, és hűvös, száraz helyen tárolja. A gél tollak hűtőszekrényben tárolhatók. A kezelés befejezése után helyezze a kupakot az tollak hegyére. Ezzel megakadályozza a fogfehérítő gél hatóanyagainak lebomlását.

MEGJEGYZÉSEK AZ ALKALMAZÁSHOZ

- Ne használja a készüléket sérült zománc, dentin vagy ínybetegség esetén.
- Ne használja a készüléket, amennyiben allergiás a gél bármelyik összetevőjére.
- A gélt nem szabad lenyelni.
- A készüléket nem használhatják 16 év alatti személyek, valamint terhes vagy szoptató nők.
- A készülék nem alkalmas fogérzékenységben szenvedő személyek számára.

- A készülék nem alkalmas kerámia és műfogak (tömések, koronák, kerámiahéjak, hidak stb.) fehérítésére.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy eltávolítsa a fogak olyan elszíneződését, amelyet sérülések vagy orvosi eljárások okoztak.
- A készülék nem alkalmas a gyógyszerek szedésével okozott elszíneződések eltávolítására.

LEGFONTOSABB TIPPEK

- A gél felvitele előtt öblítse ki a száját, és szárítsa meg a fogakat.
- A felesleges nyál gyengíti a gélkonzentrációt.
- Néhány felhasználó a kezelés után fogérzékenységet tapasztalhat, ami teljesen normális. Használhat fogfehérítést javító esszenciát a kényelmetlenség enyhítésére. Ha a túlérzékenység súlyos, rövidítse le a használati időt, vagy azonnal hagyja abba a használatát.
- Kerülje a fogfehérítő gél közvetlen érintkezését az ínnyel.
- Ha a gél az arcára vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le.
- A fogfehérítő gél hatóanyagainak elpárolgásának megakadályozása érdekében tegye a készletben található műanyag kupakot az applikátorra.
- Kérjük, tartsa az applikátorokat gyermekektől elzárva.

FAQ

Mennyi időre elég egy fogfehérítő gél applikátor?

- Egy applikátor kb. 4-5 alkalmazásra elegendő gélt tartalmaz.

Meddig tart a fogfehérítés hatása?

- A fogfehérítés hatásának körülbelül 2-3 hónapig ki kell tartania a 14 napos kezelés befejezése után. A hatás fenntartása attól is függ, hogy mennyire kerüljük a fog elszíneződését okozó ételeket.

A gél alkalmas a műfogak fehérítésére is?

- Olyan foghelyettesítők esetében, mint tömések, hidak, koronahéjak és implantátumok, a gél csak az eredeti fogak színét képes világosítani.

Káros lehet a fogfehérítő gél az egészségre?

- A gél összetevői 100%-ban biztonságosak. Használat előtt javasoljuk, hogy olvassa el a készülék használati utasításában és csomagolásán, milyen összetevőket tartalmaz a gél. Allergiás problémák esetén forduljon orvoshoz a használatával kapcsolatban.

TERMÉKEINK

- Garett Beauty Smile Strips** - ezek olyan fehérítő csíkok, amelyek azonnali hatást fejtenek ki a fogak fehérítésében. Elegendő ha kb. 30 percre felragasztják a megtisztított fogakra, utána pedig csak eltávolítják a fogakról. A CocoStrips csíkok tökéletes kombinációt jelentenek a Garett fogfehérítő szájrész használói számára.

- Garett Beauty SmileWhitening Powder** - - egy por a fogak tisztítására minden egyes szájrészes fogfehérítés előtt a Garett fehérítő tartozékkal. Hatékonyan távolítja el a kávé, a tea, a bor és a nikotinmaradványokat. A fehérítő por hetente 3-5 alkalommal használható, a fehérítő szájrész minden egyes használata előtt.

- Garett Beauty Smile Bamboo Brush** - egy bambuszból és kókuszdióhéjból készült fogkefe. A fogkefe sörtéit szénporral áztatták át, amely hatékonyan eltávolítja a fogak enyhébb elszíneződését és ragyogó hatást nyújtanak.

Jótállás / Reklamáció

A termékre 24 hónapos gyártói jótállás vonatkozik. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra: a felhasználó hibájából vagy nem megfelelő (nem rendeltetésszerű) használat következtében fellépett hibákra és sérülésekre, mechanikus sérülésekre és a készlethez mellékeltektől eltérő kiegészítők és üzemeltetési anyagok használatából eredő károsodásokra. A termékkel kapcsolatos reklamáció benyújtása során ki kell tölteni az eszközhöz csatolt jótállási lapot és az eszközt a vásárlási bizonylattal együtt el kell küldeni a szervízbe, a jótállási lapon megadott címre.

A kapcsolattartási adatok megtalálhatók a honlapon:

www.garett.eu

Gyártó:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.eu



A termék megfelelő ártalmatlanítása (elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó hulladékkezelés).

A terméken vagy a rá vonatkozó szövegekben elhelyezett jelölés arra utal, hogy azt a használati időszak elmúltával nem szabad azt a háztartásból származó többi hulladékkal együtt eltávolítani. A hulladék nem ellenőrzött eltávolítása által a természeti környezetre és az emberi egészségre kifejtett káros hatás elkerülése érdekében kérjük a terméket külön kezelni a más típusú hulladékoktól, és felelős újrahasznosítását az anyagi erőforrások újrafelhasználásának mint állandó gyakorlatnak a népszerűsítése érdekében. E termék a környezet számára biztonságos újrafeldolgozásának helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást a háztartási felhasználók a kiskereskedelmi értékesítési helyen kaphatnak, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi hatóságoknál. A céges felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és ellenőrizzék a vonatkozó feltételeket a vételi szerződésben. A terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékokkal együtt eltávolítani.



Készült a Kínai Népköztársaságban.